


# Conçue

*pour répondre  
à vos besoins*

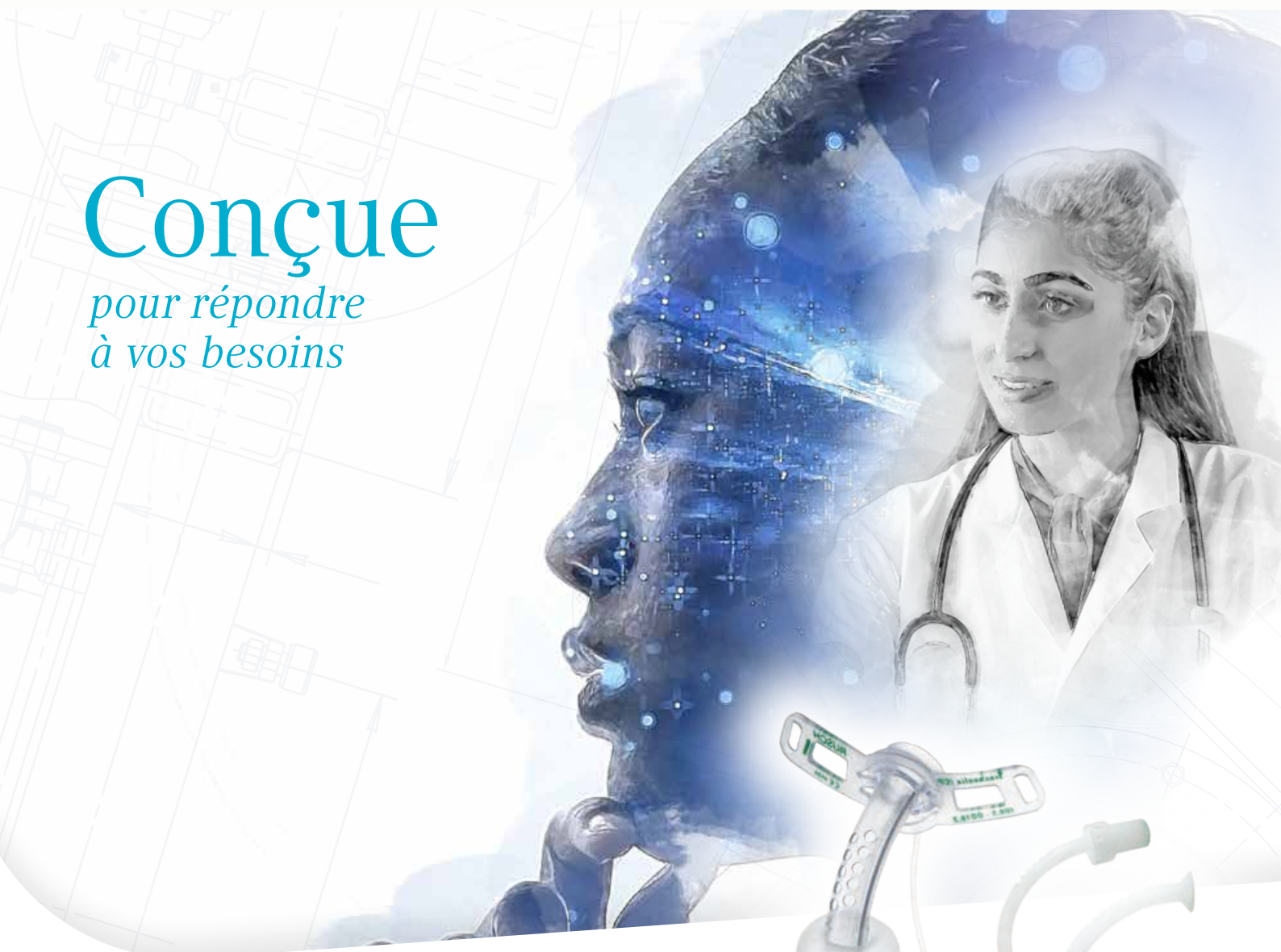

## TracheoFix

**Praticiens - Soins intensifs, ORL, bloc opératoire**

Les canules de trachéotomie Rüsch TracheoFix pour patient unique ont été conçues pour une utilisation à long terme sur un même patient. La canule en PVC thermosensible est semi-rigide pour faciliter son insertion<sup>1</sup> et s'assouplit à la température corporelle pour s'adapter à l'anatomie du patient. La conception incurvée et l'épaisseur fine de la canule, ainsi que la lanière de fixation souple et le système d'aillettes de fixation flexibles assurent le confort du patient tout en facilitant l'effort respiratoire. Le système de raccordement discret se fixe de manière sécurisée à une gamme d'accessoires dédiés à une utilisation chez des patients qui respirent spontanément.

La valve de phonation est disponible en option avec un adaptateur O<sub>2</sub> pour administrer un bolus d'oxygène au cours de l'inspiration. Nous proposons également des chemises internes de conceptions diverses, munies ou non d'un raccord de 15 mm prémonté, pour une utilisation avec toutes les canules de trachéotomie TracheoFix.

### Comment les besoins de votre profession ont-ils été pris en compte dans la conception du dispositif TracheoFix ?

- Une collerette flexible et une lanière de fixation souple contribuent à réduire le frottement de la canule contre le tissu de granulation pendant l'utilisation, ce qui peut contribuer à diminuer les risques de saignement et d'infection ainsi que l'inconfort du patient<sup>2</sup>.
- Chaque chemise interne est munie d'une bague de couleur pour indiquer avec quelle taille de canule l'utiliser, et la canule correspondante utilise le même code couleur pour les informations imprimées sur la collerette de fixation. Cela permet de réduire les risques d'utilisation accidentelle d'une chemise interne plus petite, ce qui augmenterait l'effort respiratoire.
- Le contenu des kits dépend de la canule sélectionnée, et tous les accessoires et les chemises internes peuvent être commandés séparément.

# TracheoFix

## Canule de trachéotomie

### Chemises internes



### Kits de canules fenêtrées

Options de canules fenêtrées et non fenêtrées

### Ballonnet

Les canules sont disponibles avec ou sans ballonnet basse pression

### Code couleur

Code couleur spécifique pour faciliter l'identification de la taille de la chemise interne

### Collerette flexible et fine

Facilite les soins efficaces de la stomie et permet d'utiliser des sutures et une lanière pour une fixation sûre

### Accessoires



## Canule de trachéotomie Rüsch TracheoFix

| RÉFÉRENCE<br>S UNITÉS | RÉF. | TAILLE / D.I.<br>(MM) | D.E.<br>(MM) | LONGUEUR<br>(MM) | Ø ANGLE<br>APPROX. | Ø BALLONNET<br>(MM) | CONTENU DES KITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|-----------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121400-000070         | TFC  | 7,2                   | 9,0          | 70,0             | 102 °              | 27,0                | Canule avec ballonnet, guide d'insertion, lanière de fixation, 2 chemises internes de 15 mm, guide d'insertion (obturateur).                                                                                                                                                                                                    |
| 121400-000085         | TFC  | 8,7                   | 10,3         | 78,0             | 94 °               | 27,0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121400-000100         | TFC  | 10,2                  | 12,3         | 86,0             | 90 °               | 32,0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121400-000110         | TFC  | 11,2                  | 13,3         | 86,0             | 92 °               | 35,0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121410-000070         | TFCP | 7,2                   | 9,0          | 70,0             | 102 °              | 27,0                | Canule à ballonnet, guide d'insertion, lanière de fixation, 1 chemise interne de 15 mm avec fenêtrées, 1 chemise interne sans fenêtrées, 1 chemise interne à profil bas avec fenêtrées et 1 sans fenêtrées, bague de fixation, capuchon antiprojections, valve de phonation avec adaptateur O <sub>2</sub> .                    |
| 121410-000085         | TFCP | 8,7                   | 10,3         | 78,0             | 94 °               | 27,0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121410-000100         | TFCP | 10,2                  | 12,3         | 86,0             | 90 °               | 32,0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121410-000110         | TFCP | 11,2                  | 13,3         | 86,0             | 92 °               | 35,0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121415-000070         | TF   | 7,2                   | 9,0          | 70,0             | 102 °              | —                   | Canule sans ballonnet, guide d'insertion, lanière de fixation, 1 chemise interne de 15 mm, 1 chemise interne à profil bas, bague de fixation, capuchon antiprojections.                                                                                                                                                         |
| 121415-000085         | TF   | 8,7                   | 10,3         | 78,0             | 94 °               | —                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121415-000100         | TF   | 10,2                  | 12,3         | 86,0             | 90 °               | —                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121415-000110         | TF   | 11,2                  | 13,3         | 86,0             | 92 °               | —                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121420-000070         | TFP  | 7,2                   | 9,0          | 70,0             | 102 °              | —                   | Canule sans ballonnet, guide d'insertion, lanière de fixation, 1 chemise interne de 15 mm avec fenêtrées, 1 chemise interne sans fenêtrées, 1 chemise interne à profil bas avec fenêtrées et 1 chemise interne sans fenêtrées, bague de fixation, capuchon antiprojections, valve de phonation avec adaptateur O <sub>2</sub> . |
| 121420-000085         | TFP  | 8,7                   | 10,3         | 78,0             | 94 °               | —                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121420-000100         | TFP  | 10,2                  | 12,3         | 86,0             | 90 °               | —                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121420-000110         | TFP  | 11,2                  | 13,3         | 86,0             | 92 °               | —                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Chemise interne Rüsch TracheoFix

| RÉFÉRENCE<br>S UNITÉS | D.I.<br>(MM) | D.E.<br>(MM) | DESCRIPTION                             |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
| 121425-000070         | 5,5          | 6,7          | Raccord de 15 mm prémonté               |
| 121425-000085         | 7,0          | 8,2          | Raccord de 15 mm prémonté               |
| 121425-000100         | 8,5          | 9,7          | Raccord de 15 mm prémonté               |
| 121425-000110         | 9,5          | 10,7         | Raccord de 15 mm prémonté               |
| 121430-000070         | 5,5          | 6,7          | Profil bas (format court)               |
| 121430-000085         | 7,0          | 8,2          | Profil bas (format court)               |
| 121430-000100         | 8,5          | 9,7          | Profil bas (format court)               |
| 121430-000110         | 9,5          | 10,7         | Profil bas (format court)               |
| 121435-000070         | 5,5          | 6,7          | Fenêtrée avec raccord de 15 mm prémonté |
| 121435-000085         | 7,0          | 8,2          | Fenêtrée avec raccord de 15 mm prémonté |
| 121435-000100         | 8,5          | 9,7          | Fenêtrée avec raccord de 15 mm prémonté |
| 121435-000110         | 9,5          | 10,7         | Fenêtrée avec raccord de 15 mm prémonté |
| 121440-000070         | 5,5          | 6,7          | Profil bas avec fenêtrées               |
| 121440-000085         | 7,0          | 8,2          | Profil bas avec fenêtrées               |
| 121440-000100         | 8,5          | 9,7          | Profil bas avec fenêtrées               |
| 121440-000110         | 9,5          | 10,7         | Profil bas avec fenêtrées               |

## Accessoires Rüsch TracheoFix

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                                                                  | QTÉ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 121445    | Capuchon d'étanchéité                                                        | 4   |
| 121455    | Valve de phonation avec adaptateur O <sub>2</sub>                            | 2   |
| 121460    | Capuchon antiprojections                                                     | 4   |
| 121465    | Bague de fixation pour une utilisation avec une chemise interne à profil bas | 4   |

### Références

- Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
- Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Ce document est à destination des professionnels de santé. Vérifier l'intégralité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Dispositif médicaux de classe IIa. Organisme notifié : CE 0124 Dekra. Fabricant du DM: Teleflex Medical GmbH - Allemagne

Veuillez vous adresser à votre représentant commercial Teleflex si vous souhaitez en savoir plus ou consultez notre microsite sur la trachéotomie Rüsch où vous trouverez de plus amples informations concernant cette gamme et nos autres produits Rüsch. Le contenu de l'emballage non ouvert et non endommagé est stérile, prêt à l'emploi et à usage unique. Se reporter à la notice pour connaître les avertissements, indications, contre-indications, précautions d'emploi et instructions d'utilisation actuels.

Teleflex, le logo Teleflex, Rüsch et TracheoFix sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Teleflex Incorporated ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations dans ce document ne se substituent pas au mode d'emploi du produit. Il est possible que les produits de ce catalogue ne soient pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Données à jour à la date d'impression. Mise à jour (01/2023). Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

© 2023 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. MCI-2023-0071 · RÉV. 0 · 05 23 PDF

# Teleflex

### Distribué par :

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park  
Dublin Road Athlone Co Westmeath Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73 [orders.intl@teleflex.com](mailto:orders.intl@teleflex.com)

Royaume-Uni Tél. +44 (0)14 94 53 27 61 [info.uk@teleflex.com](mailto:info.uk@teleflex.com)

Afrique du Sud Tél. +27 (0)11 807 4887 [assist.africa@teleflex.com](mailto:assist.africa@teleflex.com)



[www.teleflextracheostomy.com](http://www.teleflextracheostomy.com)