

Zaprojektowane z myślą o Twoich potrzebach

TracheoFix Opieka domowa – pacjenci i opiekunowie

Rurka tracheostomijna Rüsch TracheoFix zapewnia możliwość czyszczenia rurki i kaniuli wewnętrznej¹, aby ułatwić skuteczne utrzymanie higieny tchawicy, a system giętkich skrzydełek mocujących zapewnia dobry dostęp do stomii na potrzeby rutynowej pielęgnacji, podczas gdy rurka jest zabezpieczona za pomocą miękkiej opaski szyjnej dostarczonej w każdym zestawie. Opaski szyjne są także dostępne do zakupu osobno, gdyby uległy zabrudzeniu. Niskoprofilowy, dyskretny system połączeniowy stabilnie mocuje specjalne akcesoria przeznaczone dla pacjentów oddychających spontanicznie i może zawierać nakładkę kaszlową do kierowania odkrztuszonej płwociny w dół, do chusteczki, nakładkę uszczelniającą, która blokuje złącze rurki na potrzeby oddychania ustnego/nosowego podczas odzwyczajania od wentylacji, oraz nakładkę prysznicową, aby zredukować ryzyko przedostania się kropelek wody do rurki. Zastawka głosowa ma opcjonalny adapter O₂, umożliwiający podawanie tlenu podczas wdechu. Dostępna jest też gama różnych kaniul wewnętrznych, ze wstępnie zamocowanym 15-milimetrowym złączem (lub bez niego), przeznaczonych do stosowania ze wszystkimi rurkami tracheostomijnymi TracheoFix.

W jaki sposób potrzeby tej grupy zawodowej zostały uwzględnione w procesie projektowania produktów TracheoFix?

- Odpowiednia krzywizna rurki pomaga w bezproblemowej wymianie rurki podczas czyszczenia lub zmiany na nową².
- Cienkościenna rurka zmniejsza wysiłek oddechowy ze względu na optymalizację wewnętrznej średnicy rurki, równocześnie nie zwiększając zewnętrznej jej części, co pomaga w zapewnieniu komfortu.
- Zawartość zestawu zależy od rurki wybranej do użytku, a wszystkie akcesoria / kaniula wewnętrzna są dostępne do zamówienia osobno.
- Rurki są dostępne w wersji z mankietem lub bez mankieta, a obie wersje mogą być fenestrowane lub niefenestrowane.
- Fenestracja wielootworowa może ułatwiać dostarczenie powietrza do strun głosowych (jeśli są obecne), aby ułatwiać mówienie i optymalizować wysiłek oddechowy, jeśli nie jest konieczne stosowanie respiratora³.

TracheoFix

Rurka tracheostomijna


Kaniula wewnętrzna



Kolorowy kod
Swoisty dla rozmiaru kolorowy kod czcionki, aby ułatwić identyfikację rozmiaru kaniuli wewnętrznej

Zestawy z fenestracją
Opcje rurki fenestrowanej i niefenestrowanej

Mankiet
Rurki są dostępne w wersji z mankietem i bez mankieta niskociśnieniowego

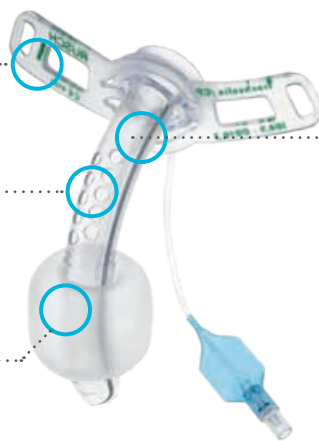

Cienki, elastyczny kołnierz
Ułatwia skuteczną pielęgnację stomii i umożliwia mocowanie zarówno za pomocą szwów, jak i opaski szyjnej

Akcesoria



Rurka tracheostomijna Rüsch TracheoFix

NUMER ZAMÓWIENIA 5 JEDNOSTEK	NUMER ZAMÓWIENIA 1 JEDNOSTKA	NR KAT.	ROZMIAR / ŚR. WEWN. (MM)	ŚR. ZEWN. (MM)	DŁUGOŚĆ (MM)	KĄT Ø OK.	MANKIET Ø (MM)	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
121400-000070	859000-000070	TFC	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Rurka z mankietem, narzędzie wprowadzające, wygodna opaska szyjna, 2 kaniule wewnętrzne 15 mm, narzędzie wprowadzające (obturator).
121400-000085	859000-000085	TFC	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121400-000100	859000-000100	TFC	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121400-000110	859000-000110	TFC	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121410-000070	859001-000070	TFCP	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Rurka z mankietem, narzędzie wprowadzające, wygodna opaska szyjna, 1 kaniula wewnętrzna 15 mm z fenestracją, 1 kaniula wewnętrzna bez fenestracji, 1 niskoprofilowa kaniula wewnętrzna z fenestracją i 1 bez fenestracji, pierścień mocujący, nakładka kaszlowa, zastawka głosowa z adapterem O ₂ .
121410-000085	859001-000085	TFCP	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121410-000100	859001-000100	TFCP	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121410-000110	859001-000110	TFCP	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121415-000070	859002-000070	TF	7,2	9,0	70,0	102°	–	Rurka bez mankieta, narzędzie wprowadzające, wygodna opaska szyjna, narzędzie wprowadzające, 1 kaniula wewnętrzna 15 mm, 1 niskoprofilowa kaniula wewnętrzna, pierścień mocujący, nakładka kaszlowa.
121415-000085	859002-000085	TF	8,7	10,3	78,0	94°	–	
121415-000100	859002-000100	TF	10,2	12,3	86,0	90°	–	
121415-000110	859002-000110	TF	11,2	13,3	86,0	92°	–	
121420-000070	859003-000070	TFP	7,2	9,0	70,0	102°	–	Rurka bez mankieta, narzędzie wprowadzające, wygodna opaska szyjna, 1 kaniula wewnętrzna 15 mm z fenestracją, 1 kaniula wewnętrzna bez fenestracji, 1 niskoprofilowa kaniula wewnętrzna z fenestracją i 1 kaniula wewnętrzna bez fenestracji, pierścień mocujący, nakładka kaszlowa, zastawka głosowa z adapterem O ₂ .
121420-000085	859003-000085	TFP	8,7	10,3	78,0	94°	–	
121420-000100	859003-000100	TFP	10,2	12,3	86,0	90°	–	
121420-000110	859003-000110	TFP	11,2	13,3	86,0	92°	–	

Kaniula wewnętrzna Rüsch TracheoFix

NUMER ZAMÓWIENIA 5 JEDNOSTEK	NUMER ZAMÓWIENIA 1 JEDNOSTKA	ŚR. WEWN. (MM)	ŚR. ZEWN. (MM)	OPIS
121425-000070	859004-000070	5,5	6,7	Wstępnie zamocowane złącze 15 mm
121425-000085	859004-000085	7,0	8,2	Wstępnie zamocowane złącze 15 mm
121425-000100	859004-000100	8,5	9,7	Wstępnie zamocowane złącze 15 mm
121425-000110	859004-000110	9,5	10,7	Wstępnie zamocowane złącze 15 mm
121430-000070	859005-000070	5,5	6,7	Niski profil (krótka)
121430-000085	859005-000085	7,0	8,2	Niski profil (krótka)
121430-000100	859005-000100	8,5	9,7	Niski profil (krótka)
121430-000110	859005-000110	9,5	10,7	Niski profil (krótka)
121435-000070	859006-000070	5,5	6,7	Fenestrowana ze wstępnie zamocowanym złączem 15 mm
121435-000085	859006-000085	7,0	8,2	Fenestrowana ze wstępnie zamocowanym złączem 15 mm
121435-000100	859006-000100	8,5	9,7	Fenestrowana ze wstępnie zamocowanym złączem 15 mm
121435-000110	859006-000110	9,5	10,7	Fenestrowana ze wstępnie zamocowanym złączem 15 mm
121440-000070	859007-000070	5,5	6,7	Niski profil z fenestracją
121440-000085	859007-000085	7,0	8,2	Niski profil z fenestracją
121440-000100	859007-000100	8,5	9,7	Niski profil z fenestracją
121440-000110	859007-000110	9,5	10,7	Niski profil z fenestracją

Rüsch TracheoFix – akcesoria

NUMER KATALOGOWY	OPIS	SZT.
121445	Nakładka uszczelniająca	4
121455	Zastawka głosowa z adapterem O ₂	2
121460	Nakładka kaszlowa	4
121465	Pierścień mocujący do stosowania z niskoprofilową kaniulą wewnętrzną	4



www.teleflextracheostomy.com

Piśmiennictwo

- Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
- Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

W razie potrzeby więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy Teleflex. Można też odwiedzić naszą mikrostronę internetową Rusch Tracheostomy, gdzie znajduje się więcej informacji na temat tej gamy produktów i innych ciekawych produktów Rüsch. Zawartość nieotwartego, nieuszkodzonego opakowania jest czysta, gotowa do użytku i przeznaczona do jednorazowego użycia. Należy się zapoznać z ulotką dołączoną do opakowania, w której można znaleźć aktualne ostrzeżenia, wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności oraz instrukcje użytkowania.

Teleflex, logo Teleflex, Rüsch, TracheoFix Plus są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Teleflex Incorporated lub jej spółek stowarzyszonych w USA i/lub innych krajach. Informacje zawarte w tym dokumencie nie zastępują instrukcji obsługi produktu. Niektóre z produktów z tego katalogu mogą być niedostępne we wszystkich krajach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem. Wszystkie dane są aktualne w momencie druku. Aktualizacja (01/2023). Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia.

© 2023 Teleflex Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone. MCI-2023-0073 · WER. 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Dystrybutor:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Faks +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Wielka Brytania Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Polska Tel. +48 22 462 40 32 · orders.pl@teleflex.com