

Ihre Bedürfnisse mitgedacht



CrystalClear Plus

Patienten und Unterstützungsnetzwerke für die häusliche Pflege

CrystalClear Plus Trachealkanülen von Rüsch wurden entwickelt, um mehr Komfort zu bieten. Die thermosensitive PVC-Kanüle weist beim Einführen die erforderliche Steifigkeit auf und wird durch die Körpertemperatur weicher, sodass sie sich an anatomische Unterschiede anpasst.

Die flexible CrystalClear Plus Innenkanüle von Rüsch kann frei entfernt oder ausgewechselt werden. Dies verringert das Risiko eines versehentlichen Herausgleitens und, wieder unter Berücksichtigung des Komforts, erhält die Leistung der Kanüle in situ. Es ist keine Reinigung erforderlich, da der Inhalt des Sets nach Gebrauch entsorgt wird.

Austauschbare Innenkanülen, Halteband und Zubehör sind praktischerweise einzeln erhältlich.




Wie wurden die Bedürfnisse Ihres Berufsstandes im Designprozess der CrystalClear Plus Produkte berücksichtigt?

- CrystalClear Plus Zubehör wird nur ohne Atemunterstützung, d. h. ohne Anschluss an ein Beatmungsgerät, verwendet.
- Zum Zubehör gehören eine Hustenkappe, um den Auswurf nach unten in ein Gewebe abzuleiten, eine Verschlusskappe, die den Kanülenansatz für die Mund-/Nasatmung verschließt, und eine Duschkappe, um das Risiko zu verringern, dass Wassertropfen in den Tubus eindringen.
- Eine flexible Halteplatte und ein weiches Halteband reduzieren während der Verwendung die Bewegung des Tubus.
- Die dünnwandigen Trachealkanülen mit und ohne Cuff sind in den Größen 3,5 mm bis 10,0 mm (einschließlich Zwischengrößen) erhältlich, um den besten Sitz und optimale Unterstützung bei der Atemarbeit sicherzustellen.
- Kits der Größe 6 und darüber enthalten 2 flexible Innenkanülen.

Rüsch CrystalClear Plus Trachealkanüle

15-mm-Drehkonnektor
Entwickelt die Drehkräfte vom
Beatmungssystem zu reduzieren

Cuff
Kanülen sind mit oder
ohne Cuff erhältlich

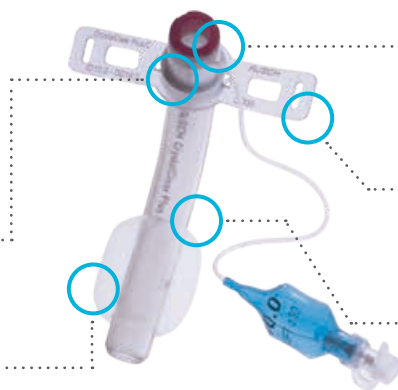

Innenkanüle
Die Farbe des Anschlussstücks der
Innenkanüle stimmt mit der Schriftfarbe
auf der Halteplatte überein

Dünne, flexible Halteplatte
Erleichtert eine effektive Stomaversorgung¹

95° Schaft
Unterstützt einen sicheren Sitz, um ein
versehentliches Herausgleiten zu verhindern²

CrystalClear Plus Trachealkanüle von Rüsch

ARTIKEL NR.* EINHEITEN ZU 5 STÜCK	ARTIKEL NR.* EINHEITEN ZU 1 STÜCK	ARTIKEL NR.** EINHEITEN ZU 5 STÜCK	ARTIKEL NR.** EINHEITEN ZU 1 STÜCK	GRÖSSE / ID (MM)	AD (MM)	LÄNGE (MM)	WINKEL Ø CA.	CUFF Ø (MM)	INNEN- KANÜLE	TUBUS	FARBCODIERUNG	VE
121300-000035	858600-000035	121303-000035	858603-000035	3,5	5,3	47,0	95°	11,0	–	3,5	Rot	5
121300-000040	858600-000040	121303-000040	858603-000040	4,0	5,9	54,0	95°	12,0	–	4,0	Weiß	5
121300-000045	858600-000045	121303-000045	858603-000045	4,5	6,5	54,0	95°	14,0	–	4,5	Grau	5
121300-000050	858600-000050	121303-000050	858603-000050	5,0	7,0	57,0	95°	14,0	–	5,0	Blau	5
121300-000055	858600-000055	121303-000055	858603-000055	5,5	7,5	58,0	95°	15,0	–	5,5	Grün	5
121300-000060	858600-000060	121303-000060	858603-000060	6,0	8,7	64,0	95°	19,0	6,0	–	Orange	5
121300-000065	858600-000065	121303-000065	858603-000065	6,5	8,7	64,0	95°	19,0	6,5	–	Kastanienbraun	5
121300-000070	858600-000070	121303-000070	858603-000070	7,0	10,0	70,0	95°	21,0	7,0	–	Blau	5
121300-000075	858600-000075	121303-000075	858603-000075	7,5	10,7	75,5	95°	25,0	7,5	–	Gelb	5
121300-000080	858600-000080	121303-000080	858603-000080	8,0	11,3	81,0	95°	28,0	8,0	–	Lila	5
121300-000085	858600-000085	121303-000085	858603-000085	8,5	11,3	81,0	95°	28,0	8,5	–	Grün	5
121300-000090	858600-000090	121303-000090	858603-000090	9,0	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	–	Braun	5
121300-000095	858600-000095	121303-000095	858603-000095	9,5	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	–	Marineblau	5
121300-000100	858600-000100	121303-000100	858603-000100	10,0	14,0	95,5	95°	30,0	10,0	–	Rot	5

*Ohne Cuff. **Mit Cuff.

Das Set enthält: Trachealkanüle (mit oder ohne Cuff), weiches Halteband, 2 farbcodierte Innenkanülen, Patientenausweis, Beutel mit Gleitgel auf Wasserbasis

Rüsch CrystalClear Zubehör

ARTIKEL NR.		BESCHREIBUNG	VE
121311		Duschkappe für Rüsch CrystalClear Plus	4
121312		Hustenkappe für Rüsch CrystalClear Plus	4
121313		Verschlusskappe für Rüsch CrystalClear Plus	4
507900		Komforthalteband	10
507800		Komforthalteband für Kinder	10

Rüsch CrystalClear Innenkanüle

ARTIKEL NR.	GRÖSSE	ID (MM)	AD (MM)	FARBCODIERUNG	VE
121310-000060	6,0	5,0	5,7	Orange	10
121310-000065	6,5	5,0	5,7	Kastanienbraun	10
121310-000070	7,0	6,0	6,7	Blau	10
121310-000075	7,5	6,5	7,3	Gelb	10
121310-000080	8,0	7,0	7,7	Lila	10
121310-000085	8,5	7,0	7,7	Grün	10
121310-000090	9,0	8,0	8,7	Braun	10
121310-000095	9,5	8,0	8,7	Marineblau	10
121310-000100	10,0	8,8	9,7	Rot	10

www.teleflextracheostomy.com



Quellenangaben

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Bitte wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihren Außendienstmitarbeiter von Teleflex oder besuchen Sie unsere Rüsch Tracheostomie-Website, wo Sie mehr über dieses Sortiment und viele andere spannende Rüsch-Produkte erfahren. Der Inhalt der ungeöffneten, unbeschädigten Verpackung ist sauber, gebrauchsfertig und zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Aktuelle Warnhinweise, Anwendungsgebiete, Gegenanzeigen, Vorsichtsmaßnahmen und Gebrauchsanweisung sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Teleflex, das Teleflex-Logo, CrystalClear und Rüsch sind eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die Informationen dieser Broschüre sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Überarbeitet 02/2023

© 2023 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. MCI-2023-0075 · REV 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Vereinigtes Königreich Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Südafrika Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com