

Ihre Bedürfnisse mitgedacht



TracFlex Plus


Medizinisches Personal – Akutstationen, HNO, OP

Wir von Teleflex haben unsere Designs in den letzten 35 Jahren kontinuierlich erneuert und verbessert und können jetzt unser neu aktualisiertes Sortiment der TracFlex Plus Trachealkanülensets für Erwachsene mit und ohne Cuff anbieten.

Da die medizinischen Indikationen für den Einsatz der Trachealkanülen vielfältig sind und Patienten oft einen Wechsel benötigen, entwickeln wir unsere Produkte im Hinblick auf verbesserte Behandlungsergebnisse bei Patienten. Wir sind davon überzeugt, dass der Komfort und die Akzeptanz der Kanüle durch den Patienten nicht nur zur Genesung beiträgt, sondern auch Ihre Teams bei der täglichen Pflege der Patienten unterstützt, die Angehörigen entlastet und das Risiko von Komplikationen verringert, so dass die gesamte Erfahrung für alle einfacher wird.

Wie wurden die Bedürfnisse Ihres Berufstandes im Designprozess der TracFlex Plus Produkte berücksichtigt?

- Die Kanüle lässt sich während des Einführens leicht kontrollieren – sie verfügt über eine glatte konische Kanülenspitze und einen Führungsdrahtkanal im Obturator.
- Die flexible/knickfeste Kanüle unterstützt den Patientenkomfort und die Akzeptanz der Kanüle bei normalen und anomalen Anatomien.¹
- Eine biegsame Halteplatte reduziert während der Verwendung die Bewegung der Kanüle an Granulationsgewebe, wodurch das Risiko im Zusammenhang mit Blutungen, Infektionen und Schmerzen minimiert wird.²
- Die verstellbare Halteplatte bewegt sich frei, wenn sie entsperrt ist, für eine sanfte Positionierung. Ein hörbares Klicken bestätigt, wenn sie sicher verriegelt ist.

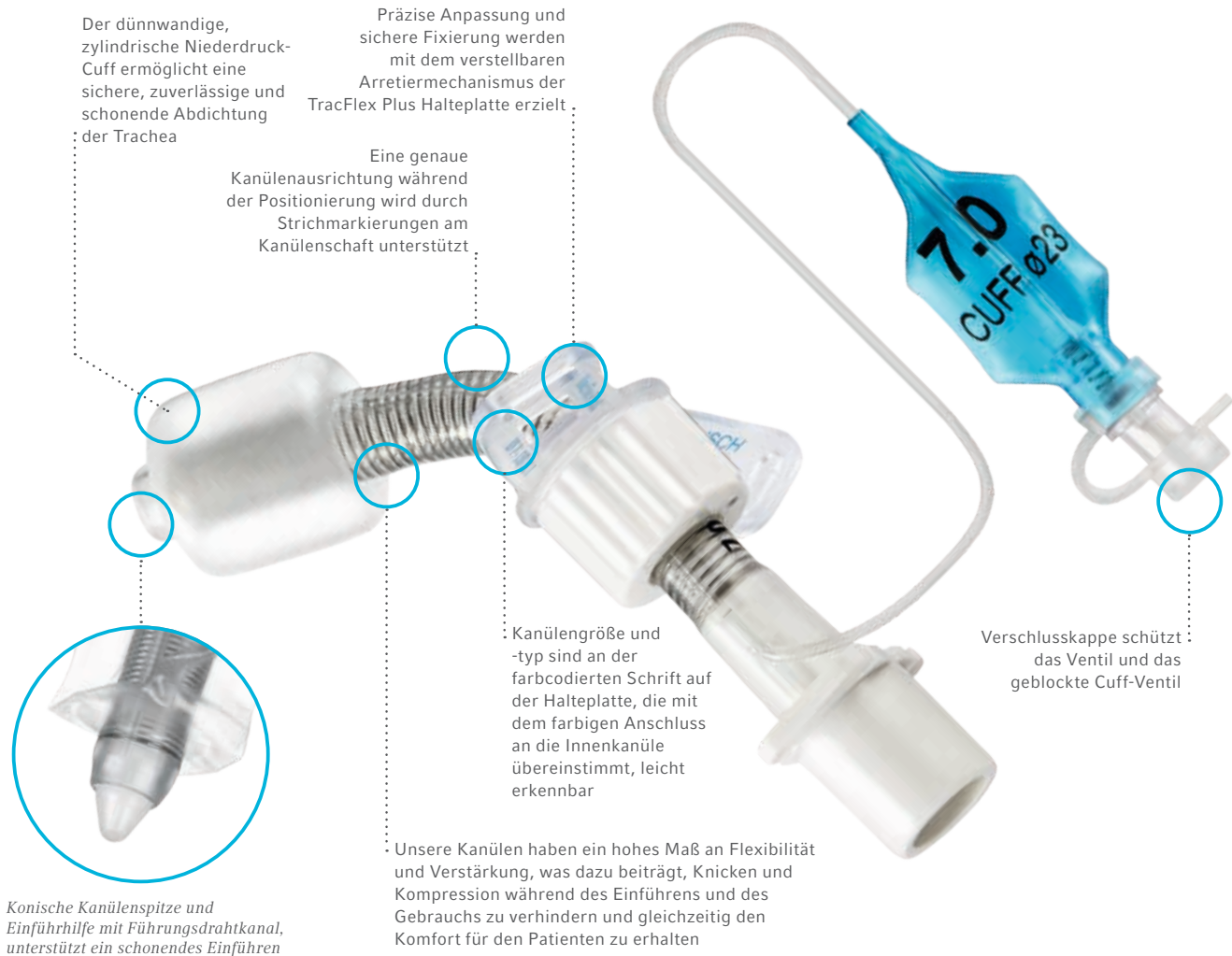

TracFlex Plus-Set (mit Cuff, Art. Nr. 121903; ohne Cuff, Art. Nr. 121900)

BESTELLGRÖSSE / ID	AD IN MM	LÄNGE (CL) BEREICH IN MM	MASS A IN MM	MASS B IN MM	MASS C IN MM	WINKEL Ø (CA.)	CUFF Ø IN MM **
7,0	10,1	60,3 – 66,5	37,5	6,2	22,8	100°	23
8,0	11,1	66,9 – 88,5	41,5	21,6	25,4	100°	27
9,0	12,1	70,4 – 117,3	44,5	46,4	26,4	100°	30
10,0	13,1	78,5 – 121,3	44,5	42,8	34,0	100°	32
11,0	14,2	80,6 – 125,3	47,5	44,7	33,1	100°	34

** Nur Versionen mit Cuff

TracFlex Plus Innenkanülen (Art. Nr. 121910)

BESTELLGRÖSSE	ID IN MM	AD IN MM	VE
7,0	5,5	6,2	10
8,0	6,5	7,2	10
9,0	7,8	8,3	10
10,0	8,8	9,4	10
11,0	9,8	10,4	10

Unser flexibles Innenkanülensystem: Effektives Sekretmanagement leicht gemacht

Die TracFlex Plus Innenkanüle wurde entwickelt, um das Innenlumen der Trachealkanüle vor Sekretablagerungen zu schützen.

Zum Einmalgebrauch, um eine gute Hygiene zu unterstützen und das Infektionsrisiko für Patienten und Pflegepersonen zu verringern.

Die dünnwandige, flexible TracFlex Plus Innenkanüle ermöglicht eine enge Anpassung an den Innendurchmesser der Trachealkanüle, mit minimaler Drehkraft am Kanülenschaft während des Einführens und Entfernens der Innenkanüle.

TracFlex Plus - Zubehör

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VE
121911	Duschkappe für TracFlex Plus Kanülen, dient als Spritzschutz, um das Eindringen oder Einatmen von Wassertropfen beim Baden oder Duschen zu verhindern	4
121912	Hustenkappe für TracFlex Plus Kanülen, um ausgestoßenes Sekret nach unten zu leiten	4
121913	Verschlusskappe für TracFlex Plus Kanülen zur Entwöhnungstherapie	4

Bitte wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihren Außendienstmitarbeiter von Teleflex oder besuchen Sie unsere Rüsch Tracheostomie-Website, wo Sie mehr über dieses Sortiment und viele andere spannende Rüsch-Produkte erfahren.

Teleflex, das Teleflex-Logo, Rüsch und TracFlex Plus sind eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die Informationen dieser Broschüre sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter. Überarbeitet 12/22. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. © 2023 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. MCI-101148 · REV 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Vereinigtes Königreich Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Südafrika Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com