

# Ihre Bedürfnisse mitgedacht



## TracFlex Plus

### Patienten und Unterstützungsnetzwerke für die häusliche Pflege


Wir von Teleflex haben unser Angebot in den letzten 35 Jahren kontinuierlich verbessert und können jetzt unser neu aktualisiertes Sortiment der TracFlex Plus Trachealkanülensets für Erwachsene mit und ohne Cuff anbieten.

Die absolut wichtigsten Vorteile bei der Entwicklung von Trachealkanülen, welche die Bedürfnisse von Patienten mit wechselnder Betreuung erfüllen, sind:

- Komfort: Trachealkanüle, Cuff (bei Bedarf), Halteplatte und Halteband
- Ermöglichung einer optimalen Atmung durch ein minimales AD/ID-Verhältnis der Kanüle
- Deziertes Zubehör, das die Sicherheit und das tägliche Leben verbessert
- Bei Bedarf, Reinigungsmöglichkeit der Kanüle zur Verbesserung der Hygieneroutine
- Damit die Trachealkanüle sauber bleibt, sollte die Innenkanüle flexibel sein, um eine Beeinträchtigung der Kanülenleistung zu vermeiden.

#### Wie wurden Ihre Bedürfnisse im Designprozess der TracFlex Plus Produkte berücksichtigt?

- Ein hochflexibler/knickfester Kanülenschaft, ein weiches Halteband und biegsame Halteflügel verbessern den Komfort während der Beatmung/Spontanatmung, des Essens und Trinkens sowie bei natürlichen Kopfbewegungen.
- Die verstellbare Halteplatte bewegt sich frei, wenn sie entsperrt ist, und erlaubt so eine sichere Nachjustierung während und nach der Stomaversorgung.
- Ein hörbares Klicken bestätigt, dass der Mechanismus der verstellbaren Halteplatte sicher verriegelt ist, um das Risiko eines versehentlichen Herausgleitens zu verringern.
- Die Halteflügel sind durchsichtig, damit der natürliche Hautton sichtbar ist.
- Flexible Innenkanüle, Dusch-, Husten- und Verschlusskappen erhältlich.

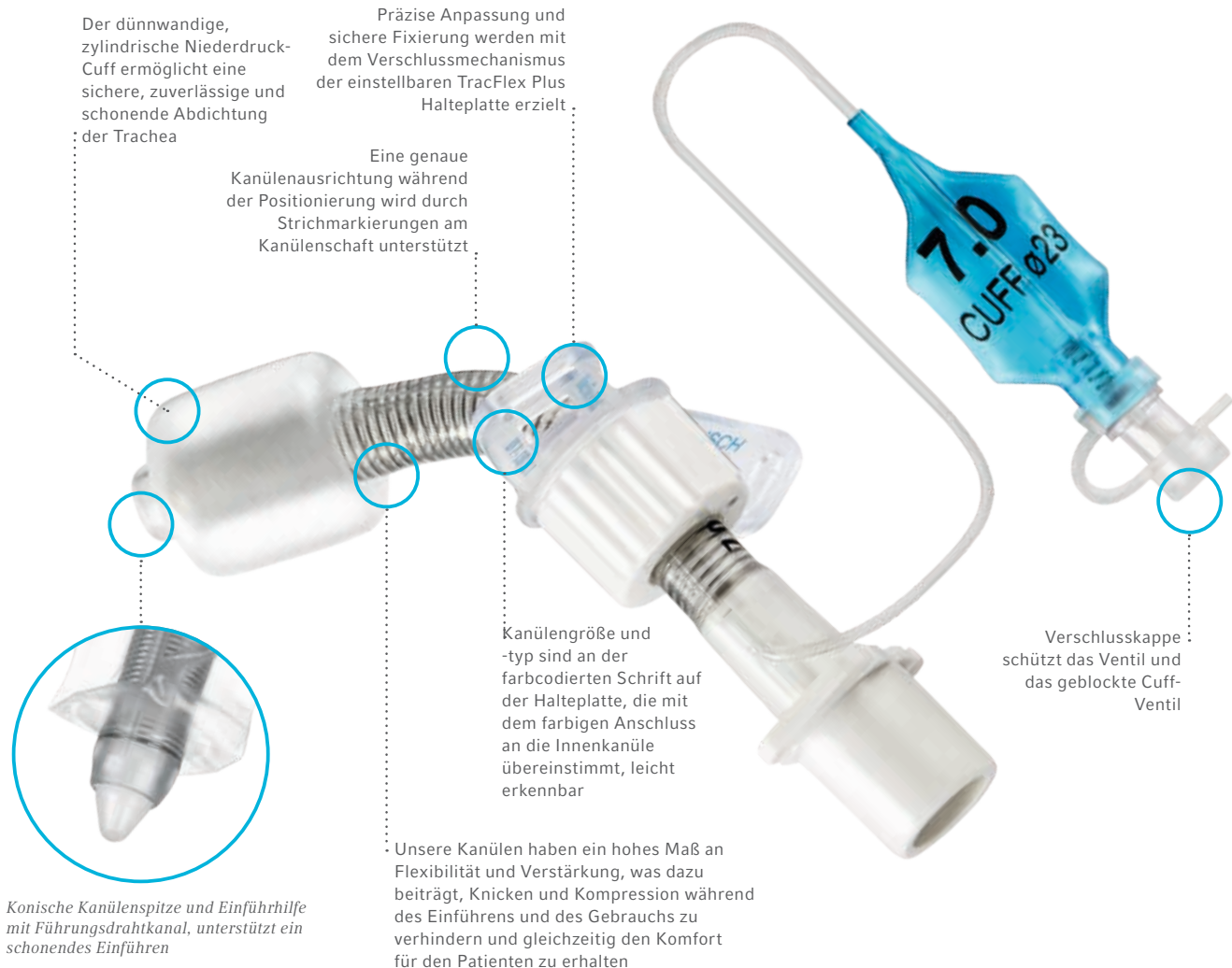

### TracFlex Plus-Set (mit Cuff, Art. Nr. 121903; ohne Cuff, Art. Nr. 121900)

| BESTELLGRÖSSE / ID | AD IN MM | LÄNGE (CL) BEREICH IN MM | MASS A IN MM | MASS B IN MM | MASS C IN MM | WINKEL Ø (CA.) | CUFF Ø IN MM ** |
|--------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 7,0                | 10,1     | 60,3 – 66,5              | 37,5         | 6,2          | 22,8         | 100°           | 23              |
| 8,0                | 11,1     | 66,9 – 88,5              | 41,5         | 21,6         | 25,4         | 100°           | 27              |
| 9,0                | 12,1     | 70,4 – 117,3             | 44,5         | 46,4         | 26,4         | 100°           | 30              |
| 10,0               | 13,1     | 78,5 – 121,3             | 44,5         | 42,8         | 34,0         | 100°           | 32              |
| 11,0               | 14,2     | 80,6 – 125,3             | 47,5         | 44,7         | 33,1         | 100°           | 34              |

\*\* Nur Versionen mit Cuff

### TracFlex Plus Innenkanülen (Art. Nr. 121910)

| BESTELLGRÖSSE | ID IN MM | AD IN MM | VE |
|---------------|----------|----------|----|
| 7,0           | 5,5      | 6,2      | 10 |
| 8,0           | 6,5      | 7,2      | 10 |
| 9,0           | 7,8      | 8,3      | 10 |
| 10,0          | 8,8      | 9,4      | 10 |
| 11,0          | 9,8      | 10,4     | 10 |

## Unser flexibles Innenkanülensystem: Effektives Sekretmanagement leicht gemacht

Die TracFlex Plus Innenkanüle wurde entwickelt, um das Innenlumen der Trachealkanüle vor Sekretablagerungen zu schützen.

Zum Einmalgebrauch, um eine gute Hygiene zu unterstützen und das Infektionsrisiko für Patienten und Pflegepersonen zu verringern.

Die dünnwandige, flexible TracFlex Plus Innenkanüle ermöglicht eine enge Anpassung an den Innendurchmesser der Trachealkanüle, mit minimaler Drehkraft am Kanülenschaft während des Einführens und Entfernens der Innenkanüle.

### TracFlex Plus - Zubehör

| ART.-NR. | BESCHREIBUNG                                                                                                                                          | VE |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 121911   | Duschkappe für TracFlex Plus Kanülen, dient als Spritzschutz, um das Eindringen oder Einatmen von Wassertropfen beim Baden oder Duschen zu verhindern | 4  |
| 121912   | Hustenkappe für TracFlex Plus Kanülen, um ausgestoßenes Sekret nach unten zu leiten                                                                   | 4  |
| 121913   | Verschlusskappe für TracFlex Plus Kanülen zur Entwöhnungstherapie                                                                                     | 4  |

Bitte wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihren Außendienstmitarbeiter von Teleflex oder besuchen Sie unsere Rüsch Tracheostomie-Website, wo Sie mehr über dieses Sortiment und viele andere spannende Rüsch-Produkte erfahren.

Teleflex, das Teleflex-Logo, Rüsch und TracFlex Plus sind eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die Informationen dieser Broschüre sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter. Überarbeitet 12/22. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. © 2023 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. MCI-101149 · REV 0 · 06 23 PDF

**Teleflex**

#### Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park  
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com  
Vereinigtes Königreich Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com  
Südafrika Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com