

Ihre Bedürfnisse **mitgedacht**



TracheoFix

Medizinisches Personal von Akutstationen, HNO, OP

TracheoFix Trachealkanülen von Rüsch für den Ein-Patienten-Gebrauch wurden im Hinblick auf den langfristigen Einsatz bei Patienten entwickelt. Das aus thermosensitivem PVC gefertigte halbstarre Design erleichtert das Einführen der Kanüle¹, wird jedoch durch die Körpertemperatur weicher, um sich der Anatomie des Patienten anzupassen. Das dünnwandige, gebogene Kanüledesign, das weiche und sichere Halteband sowie die flexiblen Flügel des Haltesystems sorgen für mehr Patientenkomfort und unterstützen die Atemarbeit. Das diskrete Anschlussystem sorgt für eine sichere Befestigung einer Reihe von speziellem Zubehör für spontan atmende Patienten.

Das Sprechventil verfügt über einen O₂-Adapter, der einen Sauerstoffbolus während der Einatmung ermöglicht. Es gibt auch eine Auswahl an Innenkanülen, entweder mit oder ohne vormontiertem 15-mm-Konnektor zur Verwendung mit allen TracheoFix Tracheostomiekanülen.

Wie wurden die Bedürfnisse Ihres Berufsstandes im Designprozess der TracheoFix Produkte berücksichtigt?

- Eine flexible Halteplatte und ein weiches Halteband reduzieren während der Verwendung die Bewegung der Kanüle an Granulationsgewebe, wodurch das Risiko im Zusammenhang mit Blutungen, Infektionen und Patientenbeschwerden minimiert wird.²
- Jede Innenkanüle verfügt über einen farbigen Ring, der angibt, mit welcher Kanülengröße diese verwendet werden soll. Die entsprechende Trachealkanüle weist die auf der Halteplatte aufgedruckten Informationen in derselben Farbe auf. Dies verringert das Risiko, dass versehentlich eine kleinere Innenkanüle verwendet wird, welche die Atemarbeit erschwert.
- Der Inhalt des Sets hängt von der ausgewählten Kanüle ab. Das gesamte Zubehör sowie die Innenkanülen sind einzeln erhältlich.



TracheoFix Trachealkanüle


Innenkanüle



Farbcodierung
Größenspezifische
farbcodierte Schrift zur
einfacheren Erkennung
der Innenkanülengröße

Fenestrierte Sets
Fenestrierte und nicht
fenestrierte Kanülenoptionen

Cuff
Kanülen sind mit oder ohne
Niederdruck-Cuff erhältlich

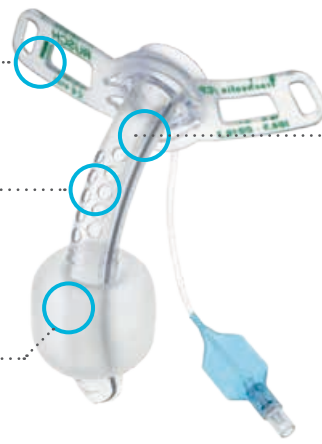

Dünne, flexible Halteplatte
Erleichtert eine effektive
Stomaversorgung und ermöglicht
die Befestigung sowohl durch
Annahrt als auch mit dem Halteband

Zubehör



Rüsch TracheoFix Trachealkanüle

BESTELLNUMMER 5 EINHEITEN	ART.- NR.	GRÖSSE / ID (MM)	AD (MM)	LÄNGE (MM)	WINKEL Ø CA.	CUFF Ø (MM)	INHALT DES SETS
121400-000070	TFC	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Kanüle mit Cuff, Komforthalteband, 2x 15-mm-Innenkanüle, Einführhilfe (Obturator).
121400-000085	TFC	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121400-000100	TFC	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121400-000110	TFC	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121410-000070	TFCP	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Kanüle mit Cuff, Einführhilfe, Komforthalteband, 1x 15-mm-Innenkanüle mit Fenestrierungen, 1 Innenkanüle ohne Fenestrierungen, 1x flache Innenkanüle mit Fenestrierungen und 1 ohne Fenestrierungen, Haltering, Hustenkappe, Sprechventil mit O ₂ -Adapter.
121410-000085	TFCP	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121410-000100	TFCP	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121410-000110	TFCP	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121415-000070	TF	7,2	9,0	70,0	102°	-	Kanüle ohne Cuff, Einführhilfe, Komforthalteband, Einführhilfe, 1x 15-mm-Innenkanüle, 1x flache Innenkanüle, Haltering, Hustenkappe.
121415-000085	TF	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121415-000100	TF	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121415-000110	TF	11,2	13,3	86,0	92°	-	
121420-000070	TFP	7,2	9,0	70,0	102°	-	Kanüle ohne Cuff, Einführhilfe, Komforthalteband, 1x 15-mm-Innenkanüle mit Fenestrierungen, 1 Innenkanüle ohne Fenestrierungen, 1x flache Innenkanüle mit Fenestrierungen, 1 Innenkanüle ohne Fenestrierungen, Haltering, Hustenkappe, Sprechventil mit O ₂ -Adapter.
121420-000085	TFP	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121420-000100	TFP	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121420-000110	TFP	11,2	13,3	86,0	92°	-	

Rüsch TracheoFix Innenkanüle

BESTELLNUMMER 5 VE	ID (MM)	AD (MM)	BESCHREIBUNG
121425-000070	5,5	6,7	Vormontierter 15-mm-Konnektor
121425-000085	7,0	8,2	Vormontierter 15-mm-Konnektor
121425-000100	8,5	9,7	Vormontierter 15-mm-Konnektor
121425-000110	9,5	10,7	Vormontierter 15-mm-Konnektor
121430-000070	5,5	6,7	Flach (kurz)
121430-000085	7,0	8,2	Flach (kurz)
121430-000100	8,5	9,7	Flach (kurz)
121430-000110	9,5	10,7	Flach (kurz)
121435-000070	5,5	6,7	Fenestriert, mit vormontiertem 15-mm-Konnektor
121435-000085	7,0	8,2	Fenestriert, mit vormontiertem 15-mm-Konnektor
121435-000100	8,5	9,7	Fenestriert, mit vormontiertem 15-mm-Konnektor
121435-000110	9,5	10,7	Fenestriert, mit vormontiertem 15-mm-Konnektor
121440-000070	5,5	6,7	Flach mit Fenestrierungen
121440-000085	7,0	8,2	Flach mit Fenestrierungen
121440-000100	8,5	9,7	Flach mit Fenestrierungen
121440-000110	9,5	10,7	Flach mit Fenestrierungen

Rüsch TracheoFix Zubehör

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	VE
121445	Verschlusskappe	4
121455	Sprechventil mit O ₂ -Adapter	2
121460	Hustenkappe	4
121465	Haltering für die flache Innenkanüle	4



www.teleflextracheostomy.com

Quellenangaben

- Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
- Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Bitte wenden Sie sich mit weiteren Fragen an Ihren Außendienstmitarbeiter von Teleflex oder besuchen Sie unsere Rüsch Tracheostomie-Website, wo Sie mehr über dieses Sortiment und viele andere spannende Rüsch-Produkte erfahren. Der Inhalt der ungeöffneten, unbeschädigten Verpackung ist sauber, gebrauchsfertig und zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Aktuelle Warnhinweise, Anwendungsgebiete, Gegenanzeigen, Vorsichtsmaßnahmen und Gebrauchsanweisung sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Teleflex, das Teleflex-Logo, Rüsch und TracheoFix sind eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Die Informationen dieser Broschüre sind kein Ersatz für die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Vertreter. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Überarbeitet (01/2023). Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

© 2023 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. MCI-2023-0071 · REV 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Vertrieb:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Vereinigtes Königreich Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Südafrika Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com