

Diseñado

para satisfacer sus necesidades



CrystalClear Plus

Personal de enfermería y red de apoyo de cuidados respiratorios en cuidados agudos

Las cánulas de traqueostomía de PVC termosensible Rüsch CrystalClear Plus, diseñadas para la comodidad del paciente y el cuidado eficaz del estoma, ofrecen funciones de seguridad adicionales exhaustivamente verificadas (incluida la inclusión de características de codificación por colores, que permiten asignar fácilmente un tamaño de tubo al tamaño de cánula interna correcta).

El personal de enfermería y la red de apoyo de cuidados respiratorios son los grupos que interactúan con más frecuencia con los pacientes de traqueostomía y sus familiares, por lo que nuestra principal prioridad es proporcionarles el respaldo necesario para los retos que deben afrontar, tanto desde el punto de vista de la usabilidad de los productos como de los tratamientos/rutinas de cuidados diarios.

¿Cómo se tuvieron en cuenta sus necesidades profesionales en el proceso de diseño de CrystalClear Plus?

- Todos los componentes del kit son de un solo uso; esto elimina la necesidad de limpieza y, en consecuencia, reduce el riesgo de infección cruzada para los pacientes y los cuidadores.
- La pestaña de cuello flexible y la banda para cuello suave reducen el movimiento del tubo contra el tejido de granulación durante el uso, lo que puede ayudar a minimizar el riesgo de sangrado, infección y dolor.
- Las cánulas de traqueostomía de pared fina con balón y sin balón están disponibles en tamaños de 3,5 mm a 10,0 mm, incluidos todos los tamaños intermedios, para aumentar la comodidad del paciente y mejorar el esfuerzo respiratorio.
- Cada kit (tamaño 6 y superiores) incluye 2 cánulas internas flexibles.

Rüsch CrystalClear Plus

Tubo de traqueostomía

Conector giratorio de 15 mm
Diseñado para reducir la torsión mediante circuitos de ventilación

Balón
Las cánulas están disponibles con o sin balón

Cánula interna


Codificación por colores específica del tamaño para facilitar la identificación de cada tamaño de cánula

Pestaña delgada y flexible

Facilita el cuidado eficaz del estoma

Vástago de 95°

Mejora la seguridad en la colocación para ayudar a evitar la descanulación accidental²

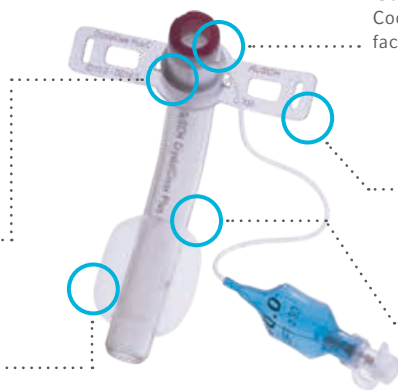

Cánula de traqueostomía Rüsch CrystalClear Plus

CÓDIGO DE PRODUCTO*	CÓDIGO DEL PRODUCTO**	TAMAÑO/ D. I. (MM)	D. E. (MM)	LONGITUD (MM)	ÁNGULO Ø APROX.	Ø BALÓN (MM)	CÁNULA INTERNA	TUBO	CÓDIGO DE COLOR	CANT.
121300-000035	121303-000035	3,5	5,3	47,0	95°	11,0	—	3,5	Rojo	5
121300-000040	121303-000040	4,0	5,9	54,0	95°	12,0	—	4,0	Blanco	5
121300-000045	121303-000045	4,5	6,5	54,0	95°	14,0	—	4,5	Gris	5
121300-000050	121303-000050	5,0	7,0	57,0	95°	14,0	—	5,0	Azul	5
121300-000055	121303-000055	5,5	7,5	58,0	95°	15,0	—	5,5	Verde	5
121300-000060	121303-000060	6,0	8,7	64,0	95°	19,0	6,0	—	Naranja	5
121300-000065	121303-000065	6,5	8,7	64,0	95°	19,0	6,5	—	Granate	5
121300-000070	121303-000070	7,0	10,0	70,0	95°	21,0	7,0	—	Azul	5
121300-000075	121303-000075	7,5	10,7	75,5	95°	25,0	7,5	—	Amarillo	5
121300-000080	121303-000080	8,0	11,3	81,0	95°	28,0	8,0	—	Lila	5
121300-000085	121303-000085	8,5	11,3	81,0	95°	28,0	8,5	—	Verde	5
121300-000090	121303-000090	9,0	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	—	Marrón	5
121300-000095	121303-000095	9,5	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	—	Azul marino	5
121300-000100	121303-000100	10,0	14,0	95,5	95°	30,0	10,0	—	Rojo	5

*Sin balón. **Con balón.

El kit contiene: Cánula de traqueostomía (con balón o sin balón), banda suave para cuello, 2 cánulas internas codificadas por colores, identificación del paciente, sobre de gel lubricante de base acuosa

Accesorios para Rüsch CrystalClear

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.
121311	Tapón para ducha para Rüsch CrystalClear Plus	4
121312	Tapón para tos para Rüsch CrystalClear Plus	4
121313	Tapa de oclusión para Rüsch CrystalClear Plus	4

Cánula interna Rüsch CrystalClear

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	D. I. (MM)	D. E. (MM)	CÓDIGO DE COLOR	CANT.
121310-000060	6,0	5,0	5,7	Naranja	10
121310-000065	6,5	5,0	5,7	Granate	10
121310-000070	7,0	6,0	6,7	Azul	10
121310-000075	7,5	6,5	7,3	Amarillo	10
121310-000080	8,0	7,0	7,7	Lila	10
121310-000085	8,5	7,0	7,7	Verde	10
121310-000090	9,0	8,0	8,7	Marrón	10
121310-000095	9,5	8,0	8,7	Azul marino	10
121310-000100	10,0	8,8	9,7	Rojo	10

Bibliografía

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Contacte con su representante de Teleflex Medical para obtener más información o visite nuestro micrositio sobre traqueostomía Rüsch, que contiene más datos sobre esta gama de productos y otros excelentes dispositivos de Rüsch. El contenido del paquete no abierto y sin daños está limpio y listo para su uso y es de un solo uso. Consulte las advertencias, indicaciones, contraindicaciones, precauciones e instrucciones de uso actuales en el prospecto.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, CrystalClear y Rüsch son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales, en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este documento no sustituye a las Instrucciones de uso del producto. Los productos de este catálogo pueden no estar disponibles en todos los países. Contacte con el delegado comercial de su zona. Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. Revisado 02 2023

© 2023 Teleflex Incorporated. Reservados todos los derechos. MCI-101150 · REV 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribuido por:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Reino Unido Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Sudáfrica Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com