

# Diseñado

*para satisfacer sus necesidades*



## TracFlex Plus


### Personal de enfermería y red de apoyo de cuidados respiratorios en cuidados agudos

Tras haber mejorado e innovado de forma continua nuestros diseños durante los últimos 35 años, Teleflex ofrece ahora su gama recién actualizada de sets de cánulas de traqueostomía con y sin balón TracFlex Plus para adultos.

El personal de enfermería y la red de apoyo de cuidados respiratorios son los grupos que interactúan con más frecuencia con los pacientes traqueostomizados y sus familiares, por lo que nuestra principal prioridad es proporcionarles el apoyo necesario para los retos que deben afrontar, tanto desde el punto de vista de la usabilidad de los productos como de los tratamientos y rutinas de cuidados diarios.

#### ¿Cómo se tuvieron en cuenta sus necesidades profesionales en el proceso de diseño de TracFlex Plus?

- Las bandas suaves para cuello y los tubos extremadamente flexibles y sin acodamientos se han desarrollado para aumentar la comodidad del paciente y la aceptación del tubo.
- La pestaña de cuello flexible reduce el movimiento del tubo contra el tejido de granulación durante el uso, lo que puede ayudar a minimizar el riesgo de sangrado, infección y dolor.
- La pestaña adaptable se desplaza libremente cuando se desbloquea y permite el acceso al traqueostoma con torsión baja en la cánula.
- Un «clic» confirma que la pestaña adaptable está fijada de forma segura para reducir el riesgo de descanulación accidental.

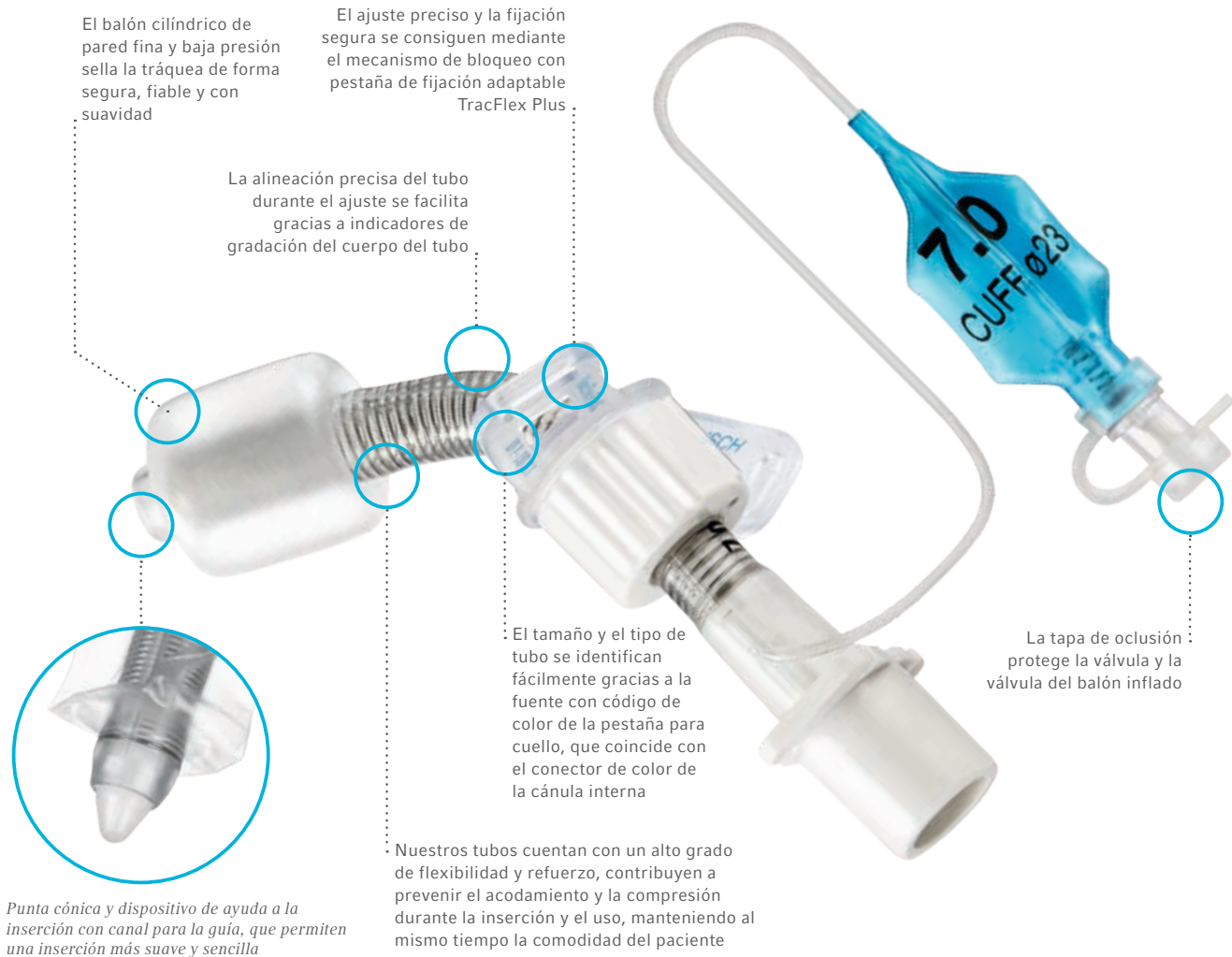

### Set TracFlex Plus (con balón, ref. 121903; sin balón, ref. 121900)

| TAMAÑO DEL PEDIDO / D. I. | D. E. EN MM | RANGO DE LONGITUD (CL) EN MM | DIM. A EN MM | DIM. B EN MM | DIM. C EN MM | ÁNGULO Ø (APROX.) | BALÓN Ø EN MM ** |
|---------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| 7,0                       | 10,1        | 60,3 - 66,5                  | 37,5         | 6,2          | 22,8         | 100°              | 23               |
| 8,0                       | 11,1        | 66,9 - 88,5                  | 41,5         | 21,6         | 25,4         | 100°              | 27               |
| 9,0                       | 12,1        | 70,4 - 117,3                 | 44,5         | 46,4         | 26,4         | 100°              | 30               |
| 10,0                      | 13,1        | 78,5 - 121,3                 | 44,5         | 42,8         | 34,0         | 100°              | 32               |
| 11,0                      | 14,2        | 80,6 - 125,3                 | 47,5         | 44,7         | 33,1         | 100°              | 34               |

\*\* Versiones con balón únicamente

### Cánulas internas TracFlex Plus (Ref. 121910)

| TAMAÑO PARA PEDIDOS | D. I. EN MM | D. E. EN MM | CANT. |
|---------------------|-------------|-------------|-------|
| 7,0                 | 5,5         | 6,2         | 10    |
| 8,0                 | 6,5         | 7,2         | 10    |
| 9,0                 | 7,8         | 8,3         | 10    |
| 10,0                | 8,8         | 9,4         | 10    |
| 11,0                | 9,8         | 10,4        | 10    |

## Nuestro sistema de cánulas internas flexibles: gestión eficaz y sencilla de las secreciones

La cánula interna TracFlex Plus se ha diseñado para proteger el lumen interno del tubo de traqueostomía frente a la acumulación de secreciones. Este dispositivo de un solo uso favorece una higiene adecuada y reduce el riesgo de infección para pacientes y cuidadores.

La cánula interior flexible de pared fina TracFlex Plus permite un ajuste perfecto en el diámetro interno de la cánula de traqueostomía, con una torsión mínima en el tubo durante la inserción y retirada de la cánula interna.

### Accesorios TracFlex Plus

| REF.   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                     | CANT. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 121911 | Tapón para ducha para cánulas TracFlex Plus, que actúa como protector contra salpicaduras a fin de evitar la entrada o inhalación de gotitas de agua durante el baño o la ducha | 4     |
| 121912 | Tapa para la tos de tubos TracFlex Plus, para orientar hacia abajo las secreciones expelidas                                                                                    | 4     |
| 121913 | Tapa de sellado para tubos TracFlex Plus, para terapia de deshabituación                                                                                                        | 4     |

Contacte con su representante de Teleflex Medical para obtener más información o visite nuestro micrositio sobre traqueostomía Rűsch, que contiene más datos sobre esta gama de productos y otros excelentes dispositivos de Rűsch.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, Rűsch y TracFlex Plus son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales, en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este documento no sustituye a las Instrucciones de uso del producto. Los productos de este catálogo pueden no estar disponibles en todos los países. Contacte con el delegado comercial de su zona. Revisado (12/22). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. © 2023 Teleflex Incorporated. Reservados todos los derechos. MCI-101091 · REV 0 · 05 23 PDF

**Teleflex**

Distribuido por:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park  
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

Reino Unido Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com

Sudáfrica Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com