

Diseñado

para satisfacer sus necesidades



TracFlex Plus


Médicos: unidades de cuidados agudos, ORL, cirugía

Tras haber mejorado e innovado de forma continua nuestros diseños durante los últimos 35 años, Teleflex ofrece ahora su gama recién actualizada de sets de cánulas de traqueostomía con y sin balón TracFlex Plus para adultos.

Las indicaciones clínicas de las cánulas de traqueostomía son muy diversas y las necesidades clínicas cambian a menudo, por lo que hemos diseñado nuestros productos para obtener resultados óptimos para los pacientes. Creemos que la comodidad y la aceptación de la cánula contribuyen no solo a la recuperación del paciente, sino que también ayudan a sus equipos en el cuidado diario de los pacientes, ya que facilitan el trabajo a los familiares que los atienden, reducen el riesgo de complicaciones y facilitan la experiencia a todos los implicados.

¿Cómo se tuvieron en cuenta sus necesidades profesionales en el proceso de diseño de TracFlex Plus?

- El tubo se controla fácilmente durante la inserción, gracias a su suave punta cónica y al canal para guía del obturador.
- Los tubos flexibles/sin acodamiento aumentan la comodidad del paciente y mejoran la aceptación en todo tipo de anatomías.¹
- La pestaña para cuello flexible reduce el movimiento del tubo contra el tejido de granulación durante el uso, lo que puede ayudar a minimizar el riesgo de sangrado, infección y dolor.²
- La pestaña adaptable se desplaza libremente cuando se desbloquea, lo que facilita la colocación (un «clic» confirma que se ha fijado de forma segura).

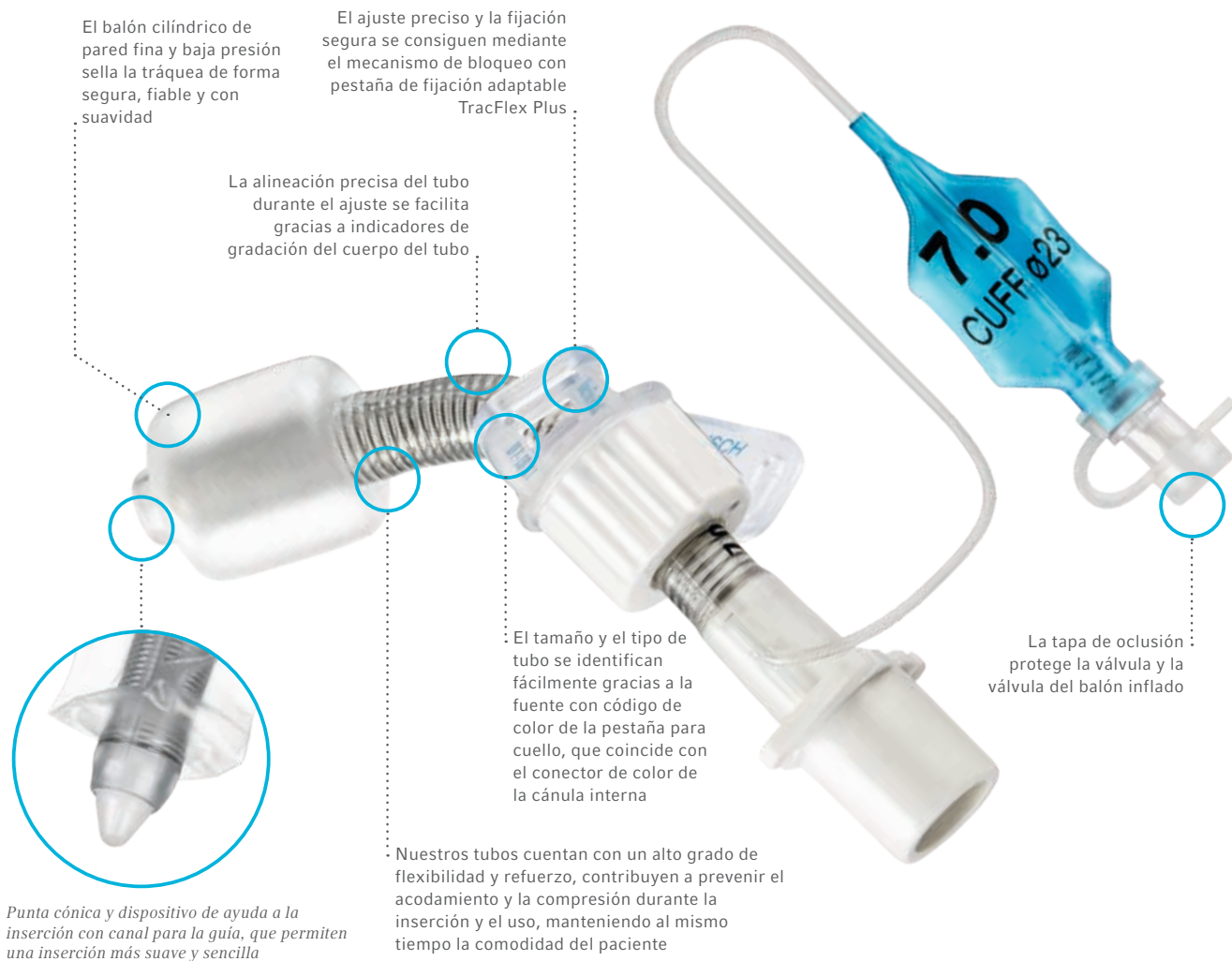

Set TracFlex Plus (con balón, ref. 121903; sin balón, ref. 121900)

TAMAÑO DEL PEDIDO / D. I.	D. E. EN MM	RANGO DE LONGITUD (CL) EN MM	DIM. A EN MM	DIM. B EN MM	DIM. C EN MM	ÁNGULO θ (APROX.)	BALÓN Ø EN MM **
● 7,0	10,1	60,3 - 66,5	37,5	6,2	22,8	100°	23
● 8,0	11,1	66,9 - 88,5	41,5	21,6	25,4	100°	27
● 9,0	12,1	70,4 - 117,3	44,5	46,4	26,4	100°	30
● 10,0	13,1	78,5 - 121,3	44,5	42,8	34,0	100°	32
● 11,0	14,2	80,6 - 125,3	47,5	44,7	33,1	100°	34

** Versiones con balón únicamente

Cánulas internas TracFlex Plus (Ref. 121910)

TAMAÑO PARA PEDIDOS	D. I. EN MM	D. E. EN MM	CANT.
● 7,0	5,5	6,2	10
● 8,0	6,5	7,2	10
● 9,0	7,8	8,3	10
● 10,0	8,8	9,4	10
● 11,0	9,8	10,4	10

Nuestro sistema de cánulas internas flexibles: gestión eficaz y sencilla de las secreciones

La cánula interna TracFlex Plus se ha diseñado para proteger el lumen interno del tubo de traqueostomía frente a la acumulación de secreciones. Este dispositivo de un solo uso favorece una higiene adecuada y reduce el riesgo de infección para pacientes y cuidadores.

La cánula interior flexible de pared fina TracFlex Plus permite un ajuste perfecto en el diámetro interno de la cánula de traqueostomía, con una torsión mínima en el tubo durante la inserción y retirada de la cánula interna.

Accesorios TracFlex Plus

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.
121911	Tapón para ducha para cánulas TracFlex Plus, que actúa como protector contra salpicaduras a fin de evitar la entrada o inhalación de gotitas de agua durante el baño o la ducha	4
121912	Tapa para la tos de tubos TracFlex Plus, para orientar hacia abajo las secreciones expelidas	4
121913	Tapa de sellado para tubos TracFlex Plus, para terapia de deshabituación	4

Contacte con su representante de Teleflex Medical para obtener más información o visite nuestro micrositio sobre traqueostomía Rűsch, que contiene más datos sobre esta gama de productos y otros excelentes dispositivos de Rűsch.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, Rűsch y TracFlex Plus son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales, en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este documento no sustituye a las Instrucciones de uso del producto. Los productos de este catálogo pueden no estar disponibles en todos los países. Contacte con el delegado comercial de su zona. Revisado (12/22). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. © 2023 Teleflex Incorporated. Reservados todos los derechos. MCI-101148 · REV 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribuido por:
Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
 Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Reino Unido Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Sudáfrica Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com