

Diseñado

para satisfacer sus necesidades



TracFlex Plus

Pacientes y redes de apoyo en cuidados domiciliarios


Tras haber mejorado e innovado de forma continua nuestros diseños durante los últimos 35 años, Teleflex ofrece ahora la gama recién actualizada de sets de tubos de traqueostomía con y sin balón TracFlex Plus para adultos.

Al diseñar las cánulas de traqueostomía para satisfacer las necesidades de los pacientes en cuidados alternos, los siguientes factores se consideran beneficios básicos indispensables:

- Comodidad: tubo, balón (si es necesario), pestaña y banda para cuello
- Se debe permitir una respiración óptima con una relación D. I/D. E. mínima
- Se deben incluir accesorios específicos para mejorar la seguridad y la calidad de vida diaria
- El tubo se puede limpiar si es necesario para mejorar las prácticas regulares de higiene
- La cánula interna que mantiene el tubo principal limpio debe ser flexible para evitar que el rendimiento del tubo se vea afectado

¿Cómo se tuvieron en cuenta sus necesidades en el proceso de diseño de TracFlex Plus?

- Tubos extremadamente flexibles y sin acodamientos, banda suave para el cuello y sistema de fijación flexible con aletas que aumentan la comodidad del paciente durante la ventilación/respiración espontánea, al comer y beber y al mover la cabeza con normalidad.
- La pestaña adaptable se desplaza libremente cuando se desbloquea, lo que permite un reajuste seguro durante y después del estoma.
- Un «clic» confirma que el mecanismo de pestaña adaptable está fijado de forma segura para reducir el riesgo de descanulación accidental.
- Las aletas de fijación del cuello son transparentes para mostrar el tono natural de la piel.
- Cánula interna flexible, con tapones para ducha y tos y tapas de oclusión disponibles.

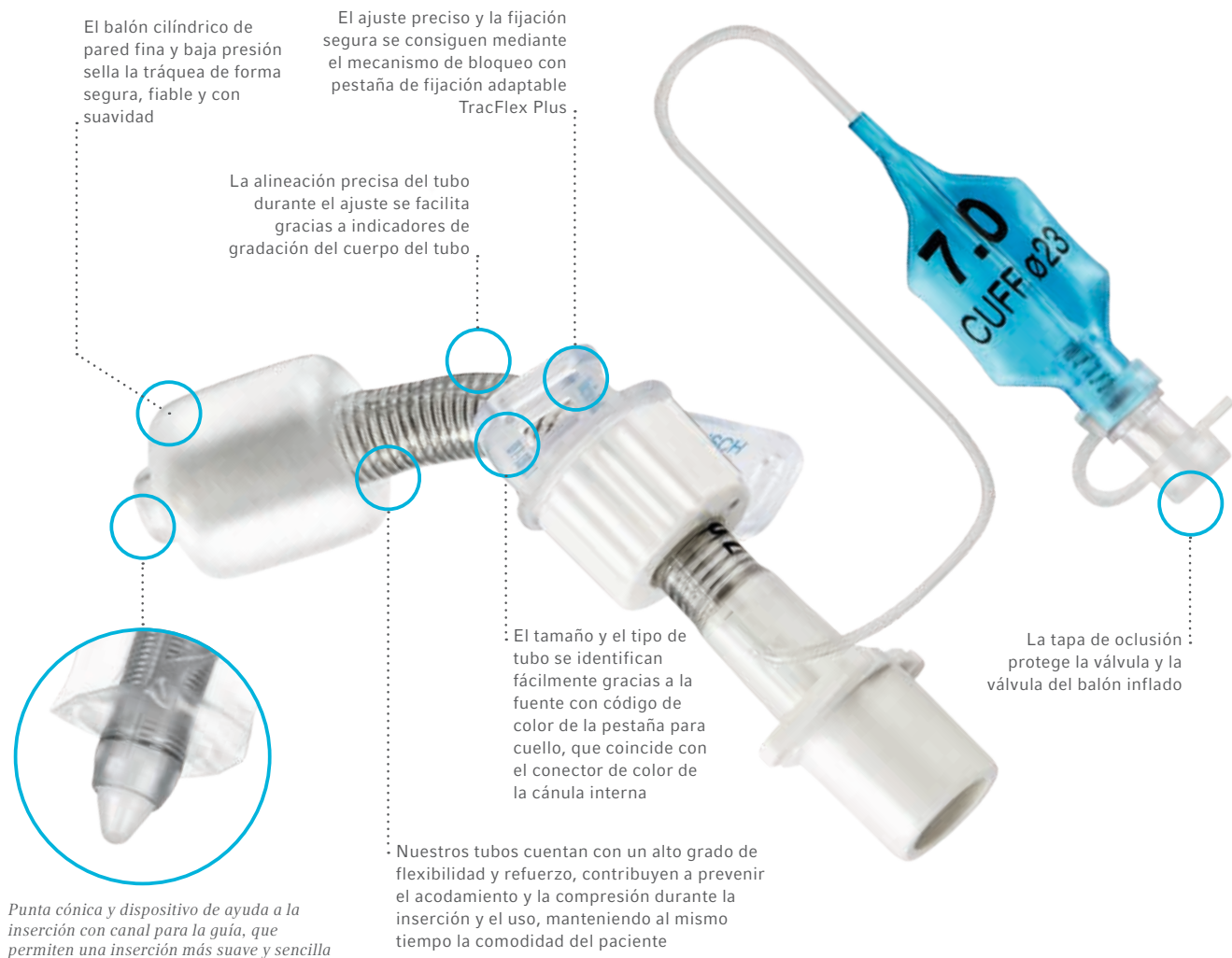

Set TracFlex Plus (con balón, ref. 121903; sin balón, ref. 121900)

TAMAÑO DEL PEDIDO / D. I.	D. E. EN MM	RANGO DE LONGITUD (CL) EN MM	DIM. A EN MM	DIM. B EN MM	DIM. C EN MM	ÁNGULO Ø (APROX.)	BALÓN Ø EN MM **
7,0	10,1	60,3 - 66,5	37,5	6,2	22,8	100°	23
8,0	11,1	66,9 - 88,5	41,5	21,6	25,4	100°	27
9,0	12,1	70,4 - 117,3	44,5	46,4	26,4	100°	30
10,0	13,1	78,5 - 121,3	44,5	42,8	34,0	100°	32
11,0	14,2	80,6 - 125,3	47,5	44,7	33,1	100°	34

** Versiones con balón únicamente

Cánulas internas TracFlex Plus (Ref. 121910)

TAMAÑO PARA PEDIDOS	D. I. EN MM	D. E. EN MM	CANT.
7,0	5,5	6,2	10
8,0	6,5	7,2	10
9,0	7,8	8,3	10
10,0	8,8	9,4	10
11,0	9,8	10,4	10

Nuestro sistema de cánulas internas flexibles: gestión eficaz y sencilla de las secreciones

La cánula interna TracFlex Plus se ha diseñado para proteger el lumen interno del tubo de traqueostomía frente a la acumulación de secreciones. Este dispositivo de un solo uso favorece una higiene adecuada y reduce el riesgo de infección para pacientes y cuidadores.

La cánula interior flexible de pared fina TracFlex Plus permite un ajuste perfecto en el diámetro interno de la cánula de traqueostomía, con una torsión mínima en el tubo durante la inserción y retirada de la cánula interna.

Accesorios TracFlex Plus

REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.
121911	Tapón para ducha para cánulas TracFlex Plus, que actúa como protector contra salpicaduras a fin de evitar la entrada o inhalación de gotitas de agua durante el baño o la ducha	4
121912	Tapa para la tos de tubos TracFlex Plus, para orientar hacia abajo las secreciones expelidas	4
121913	Tapa de sellado para tubos TracFlex Plus, para terapia de deshabituación	4

Contacte con su representante de Teleflex Medical para obtener más información o visite nuestro micrositio sobre traqueostomía Rűsch, que contiene más datos sobre esta gama de productos y otros excelentes dispositivos de Rűsch.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, Rűsch y TracFlex Plus son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales, en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este documento no sustituye a las Instrucciones de uso del producto. Los productos de este catálogo pueden no estar disponibles en todos los países. Contacte con el delegado comercial de su zona. Revisado (12/22). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso. © 2023 Teleflex Incorporated. Reservados todos los derechos. MCI-101149 · REV 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribuido por:
Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
 Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Reino Unido Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Sudáfrica Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com