

Diseñado

para satisfacer sus necesidades



TracheoFix

Médicos: cuidados agudos, ORL, cirugía

Las cánulas de traqueostomía de un solo uso Rüsch TracheoFix se han diseñado para casos de uso a largo plazo. Fabricadas con PVC termosensible, su diseño semirrígido facilita la inserción del tubo¹, pero se ablandará con la temperatura corporal para adaptarse a la anatomía del paciente. El diseño de tubo curvo de pared fina, con bandas para cuello suaves y seguras y un sistema de fijación flexible con aletas, aumenta la comodidad del paciente, además de favorecer el esfuerzo respiratorio. El discreto sistema de conexión se fija de forma segura a una gama de accesorios específicos para pacientes que respiran de forma espontánea.

La válvula de fonación incluye un adaptador de O₂ opcional para proporcionar un bolo de oxígeno durante la inspiración. También se puede optar por otros diseños de cánula interna, con o sin un conector de 15 mm preconectado, para uso con todo tipo de cánulas de traqueostomía TracheoFix.

¿Cómo se tuvieron en cuenta sus necesidades profesionales en el proceso de diseño de producto de TracheoFix?

- La pestaña flexible y la banda suave para cuello ayudan a reducir el movimiento del tubo contra el tejido de granulación durante el uso, lo que puede contribuir a minimizar los riesgos asociados al sangrado, la infección y la incomodidad del paciente.²
- Cada cánula interna incluye un anillo de color que indica el tamaño de tubo con el que se debe utilizar, y en el tubo correspondiente se emplea el mismo color para la impresión de información sobre la pestaña de fijación. Esto reduce el riesgo de utilizar accidentalmente una cánula interna más pequeña, lo que aumentaría el esfuerzo respiratorio.
- El contenido del kit depende del tubo seleccionado y todos los accesorios/cánulas internas están disponibles por separado.

TracheoFix

Tubo de traqueostomía

Cánula interna



Codificación por colores


Código de colores específicos para cada tamaño para facilitar la identificación por tamaños de la cánula interna

Kits de cánulas fenestradas

Opciones de cánula fenestrada y no fenestrada

Balón

Las cánulas están disponibles con o sin balón de baja presión

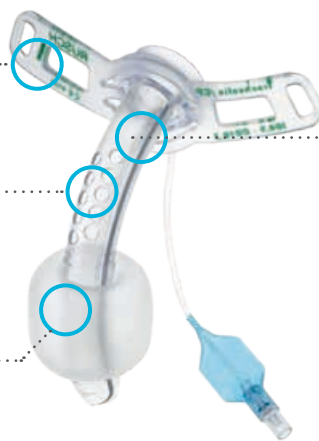

Pestaña delgada y flexible

Facilita el cuidado eficaz del estoma y ofrece la opción de utilizar tanto suturas como bandas para cuello de fijación

Accesorios



Cánula de traqueostomía Rüsch TracheoFix

N.º DE PEDIDO 5 UNIDADES	REF	TAMAÑO/ D. I. (MM)	D. E. (MM)	LONGITUD (MM)	ÁNGULO Ø APROX.	Ø BALÓN (MM)	CONTENIDO DEL KIT
121400-000070	TFC	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Cánula con balón, dispositivo de ayuda a la inserción, banda para cuello, 2 cánulas internas de 15 mm, dispositivo de ayuda a la inserción (obturador).
121400-000085	TFC	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121400-000100	TFC	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121400-000110	TFC	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121410-000070	TFCP	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Cánula con balón, dispositivo de ayuda a la inserción, bandas para cuello, 1 cánula interna de 15 mm con fenestraciones, 1 cánula interna sin fenestraciones, 1 cánula interna de perfil bajo con fenestraciones y otra sin fenestraciones, anillo de fijación, tapón para la tos, válvula de fonación con adaptador de O ₂ .
121410-000085	TFCP	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121410-000100	TFCP	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121410-000110	TFCP	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121415-000070	TF	7,2	9,0	70,0	102°	-	Cánula sin balón, dispositivo de ayuda a la inserción, bandas para cuello, dispositivo de ayuda a la inserción, 1 cánula interna de 15 mm, 1 cánula interna de perfil bajo, anillo de fijación, tapón para la tos.
121415-000085	TF	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121415-000100	TF	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121415-000110	TF	11,2	13,3	86,0	92°	-	
121420-000070	TFP	7,2	9,0	70,0	102°	-	Cánula sin balón, dispositivo de ayuda a la inserción, banda para cuello, 1 cánula interna de 15 mm con fenestraciones, 1 cánula interna sin fenestraciones, 1 cánula interna de perfil bajo con fenestraciones, 1 cánula interna sin fenestraciones, anillo de fijación, tapón para la tos, válvula de fonación con adaptador de O ₂ .
121420-000085	TFP	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121420-000100	TFP	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121420-000110	TFP	11,2	13,3	86,0	92°	-	

Cánula interna Rüsch TracheoFix

N.º DE PEDIDO 5 UNIDADES	D. I. (MM)	D. E. (MM)	DESCRIPCIÓN
121425-000070	5,5	6,7	Conector de 15 mm preconectado
121425-000085	7,0	8,2	Conector de 15 mm preconectado
121425-000100	8,5	9,7	Conector de 15 mm preconectado
121425-000110	9,5	10,7	Conector de 15 mm preconectado
121430-000070	5,5	6,7	Perfil bajo (corto)
121430-000085	7,0	8,2	Perfil bajo (corto)
121430-000100	8,5	9,7	Perfil bajo (corto)
121430-000110	9,5	10,7	Perfil bajo (corto)
121435-000070	5,5	6,7	Fenestrado con conector de 15 mm preconectado
121435-000085	7,0	8,2	Fenestrado con conector de 15 mm preconectado
121435-000100	8,5	9,7	Fenestrado con conector de 15 mm preconectado
121435-000110	9,5	10,7	Fenestrado con conector de 15 mm preconectado
121440-000070	5,5	6,7	Perfil bajo con fenestraciones
121440-000085	7,0	8,2	Perfil bajo con fenestraciones
121440-000100	8,5	9,7	Perfil bajo con fenestraciones
121440-000110	9,5	10,7	Perfil bajo con fenestraciones

Accesorios para Rüsch TracheoFix

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.
121445	Tapón de sellado	4
121455	Válvula de fonación con adaptador de O ₂	2
121460	Tapón para tos	4
121465	Anillo de fijación para uso con cánula interna de perfil bajo	4



www.teleflextracheostomy.com

Bibliografía

- Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
- Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Contacte con su representante de Teleflex Medical para obtener más información o visite nuestro micrositio sobre traqueostomía Rüsch, que contiene más datos sobre esta gama de productos y otros excelentes dispositivos de Rüsch. El contenido del paquete no abierto y sin daños está limpio y listo para su uso y es de un solo uso. Consulte las advertencias, indicaciones, contraindicaciones, precauciones e instrucciones de uso actuales en el prospecto.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, Rüsch y TracheoFix son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales, en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este documento no sustituye a las Instrucciones de uso del producto. Los productos de este catálogo pueden no estar disponibles en todos los países. Contacte con el delegado comercial de su zona. Los datos están actualizados a fecha de impresión. Revisado (01/2023). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

© 2023 Teleflex Incorporated. Reservados todos los derechos. MCI-2023-0071 · REV 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribuido por:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Reino Unido Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Sudáfrica Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com