

Diseñado

para satisfacer sus necesidades

TracheoFix

Pacientes y redes de apoyo en cuidados domiciliarios

La cánula de traqueostomía Rüsch TracheoFix ofrece la opción de limpiar el tubo y la cánula interna¹ para una higiene traqueal efectiva, y el sistema de fijación flexible con aletas permite un acceso adecuado al traqueostoma para cuidados regulares, al fijar el tubo en su posición mediante las bandas suaves para cuello que se suministran con todos los kits. Las bandas para cuello también se pueden adquirir por separado, ya que deberán desecharse cuando estén sucias. El discreto sistema de conexión de bajo perfil se fija de forma segura a los accesorios específicos durante el uso en pacientes que respiran espontáneamente, e incluye un tapón para la tos a fin de dirigir el esputo resultante hacia abajo, una tapa de oclusión que obstruye el conector de tubo para descanulación respiratoria oral/nasal y un tapón para ducha que reduce el riesgo de que las gotas de agua entren en el tubo. La válvula de fonación incluye un adaptador de O₂ opcional para proporcionar un bolo de oxígeno durante la inspiración. También se puede optar por otros diseños de cánula interna, con o sin un conector de 15 mm preconectado, para uso con todo tipo de cánulas de traqueostomía TracheoFix.

¿Cómo se tuvieron en cuenta sus necesidades profesionales en el proceso de diseño de producto de TracheoFix?

- El diseño de tubo curvo permite realizar el intercambio de tubo de forma fluida durante la limpieza o sustitución².
- El tubo de pared fina aumenta la efectividad del esfuerzo respiratorio, ya que su diámetro interno se ha optimizado, pero el exterior del tubo se ha minimizado para aumentar la comodidad.
- El contenido del kit depende del tubo seleccionado, y todos los accesorios/cánulas internas están disponibles por separado.
- Disponible en opciones con balón o sin balón y con y sin fenestración.
- Las fenestraciones de varios orificios pueden ayudar a la hora de proporcionar flujo de aire a las cuerdas vocales (si están presentes) a fin de facilitar el habla y el esfuerzo respiratorio en caso de que no se requiera ventilador³.

TracheoFix

Tubo de traqueostomía

Cánula interna



Codificación por colores


Código de colores específicos para cada tamaño para facilitar la identificación por tamaños de la cánula interna

Kits de cánulas fenestradas

Opciones de cánula fenestrada y no fenestrada

Balón

Las cánulas están disponibles con o sin balón de baja presión

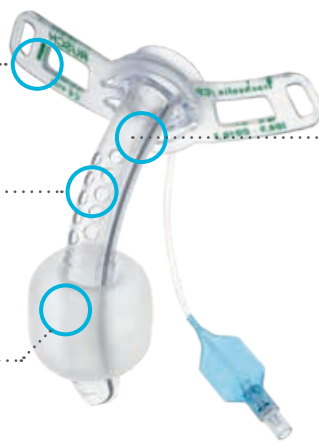

Pestaña delgada y flexible

Facilita el cuidado eficaz del estoma y ofrece la opción de utilizar tanto suturas como bandas para cuello de fijación

Accesorios



Cánula de traqueostomía RÜSCH TracheoFix

NÚMERO DE PEDIDO 5 UNIDADES	N.º DE PEDIDO 1 UNIDAD	REF	TAMAÑO/ D. I. (MM)	D. E. (MM)	LONGITUD (MM)	ÁNGULO Ø APROX.	Ø BALÓN (MM)	CONTENIDO DEL KIT
121400-000070	859000-000070	TFC	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Cánula con balón, dispositivo de ayuda a la inserción, banda para cuello, 2 cánulas internas de 15 mm, dispositivo de ayuda a la inserción (obturador).
121400-000085	859000-000085	TFC	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121400-000100	859000-000100	TFC	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121400-000110	859000-000110	TFC	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121410-000070	859001-000070	TFCP	7,2	9,0	70,0	102°	27,0	Cánula con balón, dispositivo de ayuda a la inserción, bandas para cuello, 1 cánula interna de 15 mm con fenestraciones, 1 cánula interna sin fenestraciones, 1 cánula interna de perfil bajo con fenestraciones y otra sin fenestraciones, anillo de fijación, tapón para la tos, válvula de fonación con adaptador de O ₂ .
121410-000085	859001-000085	TFCP	8,7	10,3	78,0	94°	27,0	
121410-000100	859001-000100	TFCP	10,2	12,3	86,0	90°	32,0	
121410-000110	859001-000110	TFCP	11,2	13,3	86,0	92°	35,0	
121415-000070	859002-000070	TF	7,2	9,0	70,0	102°	-	Cánula sin balón, dispositivo de ayuda a la inserción, bandas para cuello, dispositivo de ayuda a la inserción, 1 cánula interna de 15 mm, 1 cánula interna de perfil bajo, anillo de fijación, tapón para la tos.
121415-000085	859002-000085	TF	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121415-000100	859002-000100	TF	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121415-000110	859002-000110	TF	11,2	13,3	86,0	92°	-	
121420-000070	859003-000070	TFP	7,2	9,0	70,0	102°	-	Cánula sin balón, dispositivo de ayuda a la inserción, banda para cuello, 1 cánula interna de 15 mm con fenestraciones, 1 cánula interna sin fenestraciones, 1 cánula interna de perfil bajo con fenestraciones, 1 cánula interna sin fenestraciones, anillo de fijación, tapón para la tos, válvula de fonación con adaptador de O ₂ .
121420-000085	859003-000085	TFP	8,7	10,3	78,0	94°	-	
121420-000100	859003-000100	TFP	10,2	12,3	86,0	90°	-	
121420-000110	859003-000110	TFP	11,2	13,3	86,0	92°	-	

Cánula interna RÜSCH TracheoFix

N.º DE PEDIDO 5 UNIDADES	N.º DE PEDIDO 1 UNIDAD	D. I. (MM)	D. E. (MM)	DESCRIPCIÓN
121425-000070	859004-000070	5,5	6,7	Conector de 15 mm preconectado
121425-000085	859004-000085	7,0	8,2	Conector de 15 mm preconectado
121425-000100	859004-000100	8,5	9,7	Conector de 15 mm preconectado
121425-000110	859004-000110	9,5	10,7	Conector de 15 mm preconectado
121430-000070	859005-000070	5,5	6,7	Perfil bajo (corto)
121430-000085	859005-000085	7,0	8,2	Perfil bajo (corto)
121430-000100	859005-000100	8,5	9,7	Perfil bajo (corto)
121430-000110	859005-000110	9,5	10,7	Perfil bajo (corto)
121435-000070	859006-000070	5,5	6,7	Fenestrado con conector de 15 mm preconectado
121435-000085	859006-000085	7,0	8,2	Fenestrado con conector de 15 mm preconectado
121435-000100	859006-000100	8,5	9,7	Fenestrado con conector de 15 mm preconectado
121435-000110	859006-000110	9,5	10,7	Fenestrado con conector de 15 mm preconectado
121440-000070	859007-000070	5,5	6,7	Perfil bajo con fenestraciones
121440-000085	859007-000085	7,0	8,2	Perfil bajo con fenestraciones
121440-000100	859007-000100	8,5	9,7	Perfil bajo con fenestraciones
121440-000110	859007-000110	9,5	10,7	Perfil bajo con fenestraciones

Accesorios para RÜSCH TracheoFix

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.
121445	Tapón de sellado	4
121455	Válvula de fonación con adaptador de O ₂	2
121460	Tapón para tos	4
121465	Anillo de fijación para uso con cánula interna de perfil bajo	4



www.teleflextracheostomy.com

Bibliografía

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Contacte con su representante de Teleflex Medical para obtener más información o visite nuestro micrositio sobre traqueostomía RÜSCH, que contiene más datos sobre esta gama de productos y otros excelentes dispositivos de RÜSCH. El contenido del paquete no abierto y sin daños está limpio y listo para su uso y es de un solo uso. Consulte las advertencias, indicaciones, contraindicaciones, precauciones e instrucciones de uso actuales en el prospecto.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, RÜSCH y TracheoFix Plus son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales, en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este documento no sustituye a las Instrucciones de uso del producto. Los productos de este catálogo pueden no estar disponibles en todos los países. Contacte con el delegado comercial de su zona. Los datos están actualizados a fecha de impresión. Revisado (01/2023). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

© 2023 Teleflex Incorporated. Reservados todos los derechos. MCI-2023-0073 · REV 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribuido por:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Reino Unido Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Sudáfrica Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com