


Conçue

*pour répondre
à vos besoins*

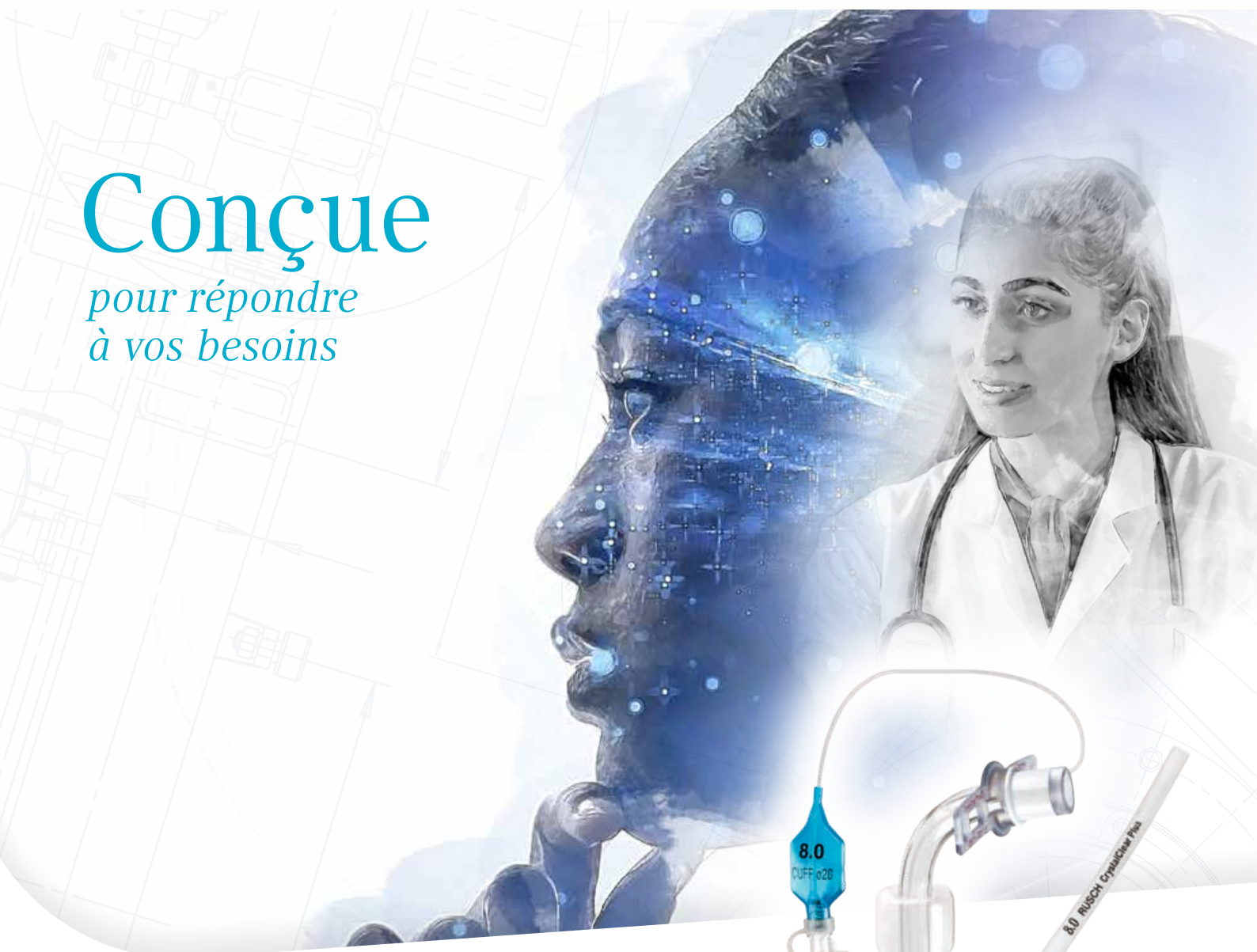

CrystalClear Plus

Praticiens - Soins intensifs, ORL, bloc opératoire

Les canules de trachéotomie Rüsch CrystalClear à usage unique sont conçues pour fournir une solution plus économique que les canules restérilisables pour un même patient, en particulier s'il s'agit de la première canule, car un changement est généralement nécessaire avant 30 jours¹.

La canule de trachéotomie Rüsch CrystalClear Plus en PVC thermosensible a une rigidité suffisante pour l'insertion, puis s'assouplit à la température corporelle pour épouser l'anatomie du patient¹.

Les chemises internes pour les canules de trachéotomie CrystalClear Plus sont stériles, sans latex, avec un maillage en polyester souple (PET) sans DEHP et munies d'une butée en silicone à code couleur intégrée non amovible. La conception flexible ne compromet pas la performance de la canule thermosensible.

Comment les besoins de votre profession ont-ils été pris en compte dans la conception du dispositif CrystalClear Plus ?


- Une collerette flexible et une lanière de fixation souple permettent de réduire le frottement de la canule contre le tissu de granulation pendant l'utilisation, ce qui peut contribuer à diminuer les risques de saignement et d'infection ainsi que l'inconfort du patient².
- Les canules de trachéotomie fines avec et sans ballonnet sont disponibles dans des tailles de 3,5 à 10,0 mm avec des demi-tailles intermédiaires, pour favoriser le confort du patient et faciliter l'effort respiratoire.
- Les kits à partir de la taille 6 incluent deux chemises internes avec code couleur.
- Le raccord rotatif intégré de 15 mm contribue à réduire la torsion lorsque le circuit respiratoire est mobilisé au cours des soins.

Rüsch CrystalClear Plus

Canule de trachéotomie

Raccord rotatif de 15 mm
Conçu pour réduire la torsion avec les circuits de ventilation

Ballonnet
Les canules sont disponibles avec ou sans ballonnet

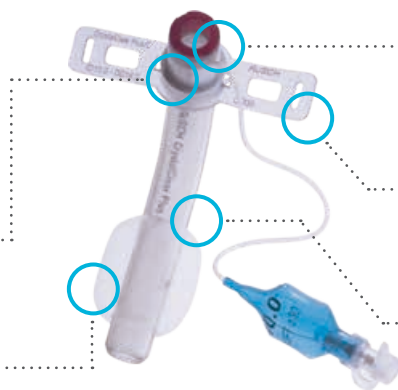

Chemise interne
Couleur de l'embase de la chemise interne identique à la couleur des inscriptions sur la collerette de fixation

Collerette flexible et fine
Facilite les soins efficaces de la stomie¹

Gaine à 95 °
Favorise une fixation sûre pour éliminer tout risque de décanulation accidentelle²

Canule de trachéotomie Rüsch CrystalClear Plus

RÉFÉRENCE*	RÉFÉRENCE**	TAILLE / D.I. (MM)	D.E. (MM)	LONGUEUR (MM)	Ø ANGLE APPROX.	Ø BALLONNET (MM)	CHEMISE INTERNE	CANULE	CODE COULEUR	QTÉ
121300-000035	121303-000035	3,5	5,3	47,0	95 °	11,0	–	3,5	Rouge	5
121300-000040	121303-000040	4,0	5,9	54,0	95 °	12,0	–	4,0	Blanc	5
121300-000045	121303-000045	4,5	6,5	54,0	95 °	14,0	–	4,5	Gris	5
121300-000050	121303-000050	5,0	7,0	57,0	95 °	14,0	–	5,0	Bleu	5
121300-000055	121303-000055	5,5	7,5	58,0	95 °	15,0	–	5,5	Vert	5
121300-000060	121303-000060	6,0	8,7	64,0	95 °	19,0	6,0	–	Orange	5
121300-000065	121303-000065	6,5	8,7	64,0	95 °	19,0	6,5	–	Bordeaux	5
121300-000070	121303-000070	7,0	10,0	70,0	95 °	21,0	7,0	–	Bleu	5
121300-000075	121303-000075	7,5	10,7	75,5	95 °	25,0	7,5	–	Jaune	5
121300-000080	121303-000080	8,0	11,3	81,0	95 °	28,0	8,0	–	Violet	5
121300-000085	121303-000085	8,5	11,3	81,0	95 °	28,0	8,5	–	Vert	5
121300-000090	121303-000090	9,0	12,7	87,0	95 °	28,0	9,0	–	Marron	5
121300-000095	121303-000095	9,5	12,7	87,0	95 °	28,0	9,0	–	Bleu marine	5
121300-000100	121303-000100	10,0	14,0	95,5	95 °	30,0	10,0	–	Rouge	5

*Sans ballonnet **Avec ballonnet

Contenu du kit : Canule de trachéotomie avec ou sans ballonnet, lanière de fixation souple, 2 chemises internes avec code couleur, carte patient, sachet de gel lubrifiant à base d'eau

Accessoires Rüsch CrystalClear

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QTÉ
121311	Capuchon protège-douche pour Rüsch CrystalClear Plus	4
121312	Capuchon antiprojections pour Rüsch CrystalClear Plus	4
121313	Capuchon d'étanchéité pour Rüsch CrystalClear Plus	4

Kit Rüsch Crystal Clear PercuTwist PDT

RÉF.	TAILLE DE COMMANDE/D.I.	QTÉ
121556	7,0 / 8,0 / 9,0	1

Contenu du kit : Canule avec introducteur, aiguille de ponction, seringue, guide, chemise interne, lanière de fixation

Chemise interne Rüsch CrystalClear

RÉFÉRENCE	TAILLE	D.I. (MM)	D.E. (MM)	CODE COULEUR	QTÉ
121310-000060	6,0	5,0	5,7	Orange	10
121310-000065	6,5	5,0	5,7	Bordeaux	10
121310-000070	7,0	6,0	6,7	Bleu	10
121310-000075	7,5	6,5	7,3	Jaune	10
121310-000080	8,0	7,0	7,7	Violet	10
121310-000085	8,5	7,0	7,7	Vert	10
121310-000090	9,0	8,0	8,7	Marron	10
121310-000095	9,5	8,0	8,7	Bleu marine	10
121310-000100	10,0	8,8	9,7	Rouge	10

www.teleflextracheostomy.com



Références

1. Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
2. Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

Ce document est à destination des professionnels de santé. Vérifier l'intégralité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Dispositif médicaux de classe IIa (Canules et Chemises) et de classe I (Accessoires). Organisme notifié : BSI - CE 2797. Fabricant des DM : Teleflex Medical Athlone, Irlande.

Le Kit Rüsch CrystalClear PercuTwist PDT est un dispositif médical de classe IIa. Organisme notifié : CE 0124 Dekra. Fabricant du DM : Teleflex Medical GmbH, Allemagne. Veuillez vous adresser à votre représentant commercial Teleflex si vous souhaitez en savoir plus ou consultez notre microsite sur la trachéotomie Rüsch où vous trouverez de plus amples informations concernant cette gamme et nos autres produits Rüsch. Le contenu de l'emballage non ouvert et non endommagé est stérile, prêt à l'emploi et à usage unique. Se reporter à la notice pour connaître les avertissements, indications, contre-indications, précautions d'emploi et instructions d'utilisation actuels.

Teleflex, le logo Teleflex, CrystalClear et Rüsch sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Teleflex Incorporated ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations dans ce document ne se substituent pas au mode d'emploi du produit. Il est possible que les produits de ce catalogue ne soient pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Mise à jour 02 2023

© 2023 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. MCI-2023-0074 · RÉV. 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribué par :
Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road Athlone Co Westmeath Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73 orders.intl@teleflex.com
Royaume-Uni Tél. +44 (0)14 94 53 27 61 info.uk@teleflex.com
Afrique du Sud Tél. +27 (0)11 807 4887 assist.africa@teleflex.com