

Conçue
pour répondre
à vos besoins



TracFlex Plus


Praticiens - Soins intensifs, ORL, bloc opératoire

Chez Teleflex, nous avons continuellement innové et amélioré nos dispositifs depuis 35 ans. C'est pour cela que nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle gamme de canules de trachéotomie pour adultes TracFlex Plus, avec et sans ballonnet.

Les indications cliniques pour l'utilisation des canules de trachéotomie sont diverses et les besoins des patients évoluent. Nous concevons nos dispositifs pour améliorer leur prise en charge. Nous estimons que le confort des patients et leur acceptation de la trachéotomie contribuent à leur rétablissement, aident vos équipes soignantes au quotidien, rassurent les proches et réduisent le risque de complications.

Comment les besoins de votre profession ont-ils été pris en compte dans la conception du dispositif TracFlex Plus ?

- La canule est facile à manier lors de l'insertion en raison de son extrémité conique lisse et d'un canal de guidage dans l'obturateur.
- La tubulure flexible/antiplicature s'adapte à toutes les anatomies, favorisant le confort du patient et son acceptation de la trachéotomie¹.
- La collerette souple réduit le frottement de la canule contre le tissu de granulation pendant l'utilisation, ce qui peut contribuer à diminuer les risques de saignement et d'infection, ainsi que la douleur².
- La collerette réglable est facile à manipuler lorsqu'elle est détachée, ce qui facilite une bonne mise en place, et un clic audible confirme qu'elle est fermement verrouillée.

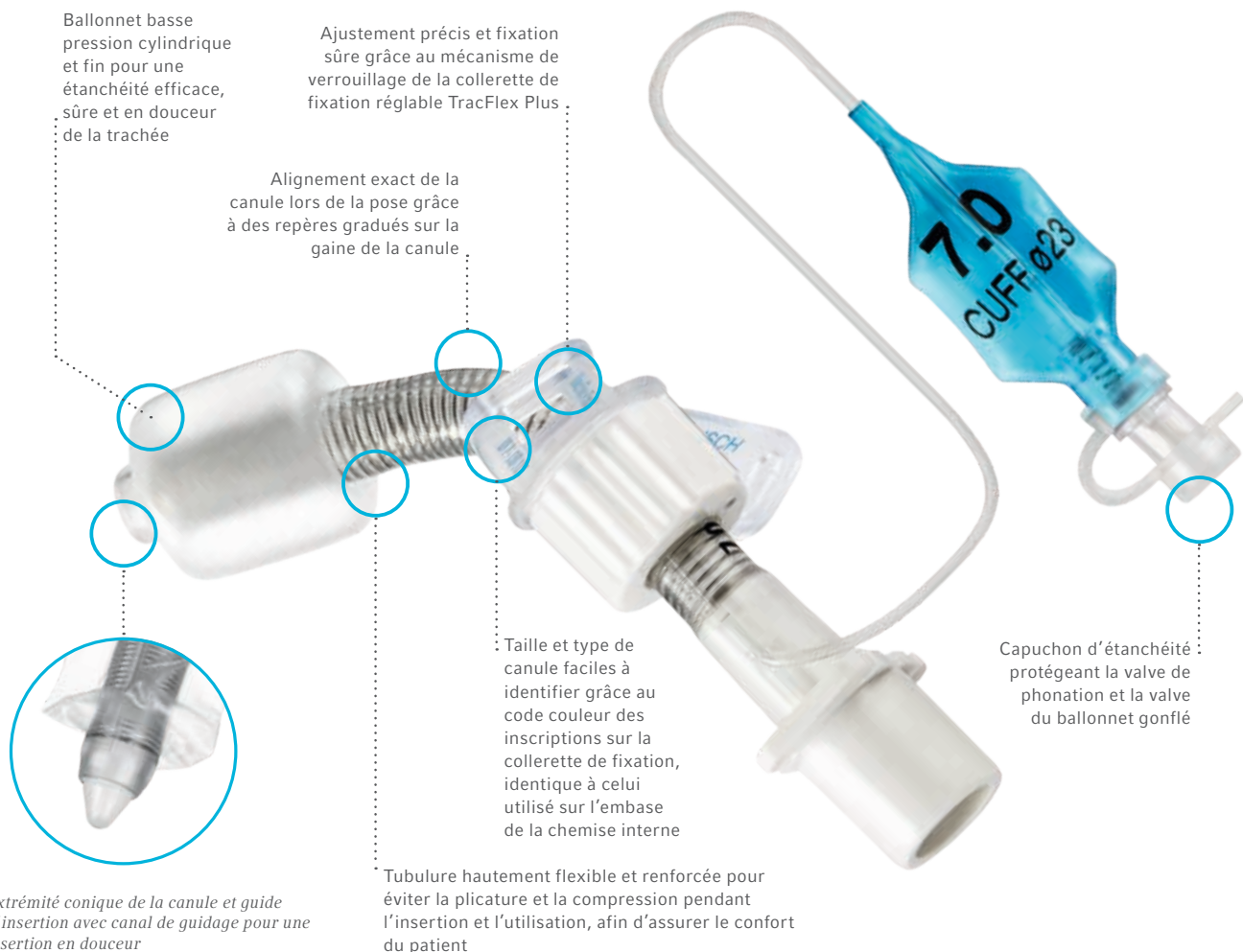

Kit TracFlex Plus (avec ballonnet, réf. 121903 ; sans ballonnet, réf. 121900)

TAILLE DE COMMANDE / D.I.	D.E. EN MM	PLAGE DE LONGUEURS (LC) EN MM	DIM. A EN MM	DIM. B EN MM	DIM. C EN MM	ANGLE θ (ENV.)	Ø DU BALL. EN MM **
● 7,0	10,1	60,3 - 66,5	37,5	6,2	22,8	100 °	23
● 8,0	11,1	66,9 - 88,5	41,5	21,6	25,4	100 °	27
● 9,0	12,1	70,4 - 117,3	44,5	46,4	26,4	100 °	30
● 10,0	13,1	78,5 - 121,3	44,5	42,8	34,0	100 °	32
● 11,0	14,2	80,6 - 125,3	47,5	44,7	33,1	100 °	34

** Uniquement versions avec ballonnet

Chemises internes TracFlex Plus (réf. 121910)

TAILLE DE COMMANDE	D.I. EN MM	D.E. EN MM	QTÉ
● 7,0	5,5	6,2	10
● 8,0	6,5	7,2	10
● 9,0	7,8	8,3	10
● 10,0	8,8	9,4	10
● 11,0	9,8	10,4	10

Notre système de chemise interne souple : Gestion efficace et simplifiée des sécrétions

La chemise interne TracFlex Plus est conçue pour éviter l'accumulation de sécrétions dans la lumière interne de la canule de trachéotomie. Elle est à usage unique pour favoriser une bonne hygiène, et réduit ainsi le risque d'infection chez les patients et les soignants.

La chemise interne TracFlex Plus, fine et flexible, s'adapte parfaitement au diamètre interne de la canule de trachéotomie. La torsion de la canule est ainsi minimisée pendant l'insertion et le retrait de la chemise interne.

Accessoires TracFlex Plus

RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
121911	Capuchon protège-douche pour canules TracFlex Plus, pour éviter l'infiltration ou l'inhalation de gouttes d'eau dans le bain ou la douche	4
121912	Capuchon antiprojections pour les canules TracFlex Plus, afin de rediriger les sécrétions expulsées	4
121913	Capuchon d'étanchéité pour canules TracFlex Plus, pour le sevrage	4

Ce document est à destination des professionnels de santé. Vérifier l'intégralité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Dispositif médicaux de classe : IIb. Organisme notifié : BSI - CE 2797. Fabricant des DM : Teleflex Medical Athlone Irlande. Veuillez vous adresser à votre représentant commercial Teleflex si vous souhaitez en savoir plus ou consultez notre microsite sur la trachéotomie Rüsch où vous trouverez de plus amples informations concernant cette gamme et nos autres produits Rüsch.

Teleflex, le logo Teleflex, Rüsch et TracFlex Plus sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Teleflex Incorporated ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations dans ce document ne se substituent pas au mode d'emploi du produit. Il est possible que les produits de ce catalogue ne soient pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Mise à jour 12 22. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. © 2023 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. MCI-101148 - RÉV. 0 - 05 23 PDF

Teleflex

Distribué par :

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road Athlone Co Westmeath Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73 orders.intl@teleflex.com

Royaume-Uni Tél. +44 (0)14 94 53 27 61 info.uk@teleflex.com

Afrique du Sud Tél. +27 (0)11 807 4887 assist.africa@teleflex.com