


Conçue
pour répondre
à vos besoins

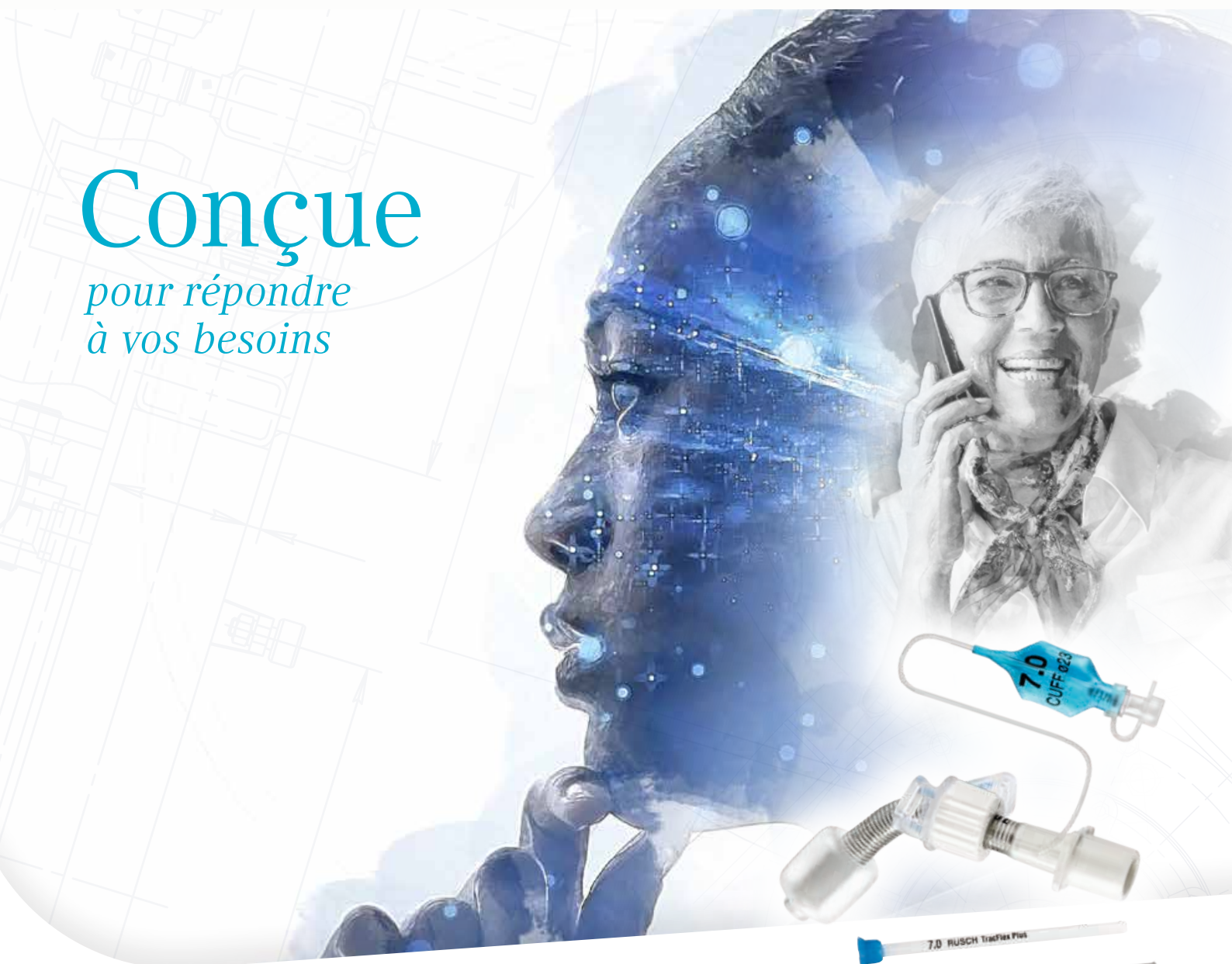

TracFlex Plus

Patients et aidants pour les soins à domicile


Chez Teleflex, nous avons continuellement innové et amélioré nos dispositifs depuis 35 ans. C'est pour cela que nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle gamme de canules de trachéotomie pour adultes TracFlex Plus, avec et sans ballonnet.

Certaines caractéristiques sont indispensables pour répondre aux besoins du patient :

- Confort : canule, ballonnet (si nécessaire), collerette et lanière de fixation;
- Respiration optimisée avec un ratio minimal entre le diamètre externe et le diamètre interne;
- Accessoires dédiés pour accroître la sécurité et améliorer la vie au quotidien;
- Possibilité de nettoyer la canule si nécessaire pour une meilleure hygiène;
- Flexibilité de la chemise interne assurant la propreté de la canule, afin de ne pas altérer ses performances.

Comment vos besoins ont-ils été pris en compte dans la conception du dispositif TracFlex Plus ?

- La tubulure hautement flexible/antiplicature, la collerette de fixation souple et les ailettes de fixation flexibles assurent le confort pendant la ventilation/respiration spontanée, lorsque le patient mange et boit, et lors des mouvements naturels de la tête.
- La collerette réglable est facile à manipuler lorsqu'elle est détachée, ce qui permet un réajustement en toute sécurité pendant et après les soins de la stomie.
- Un clic audible confirme que le mécanisme de la collerette réglable est fermement enclenché, ce qui réduit le risque de décanulation accidentelle.
- Les ailettes de fixation au cou sont transparentes et laissent donc apparaître la couleur naturelle de la peau.
- Chemise interne flexible, capuchon protège-douche, capuchon antiprojections et capuchon d'étanchéité disponibles.

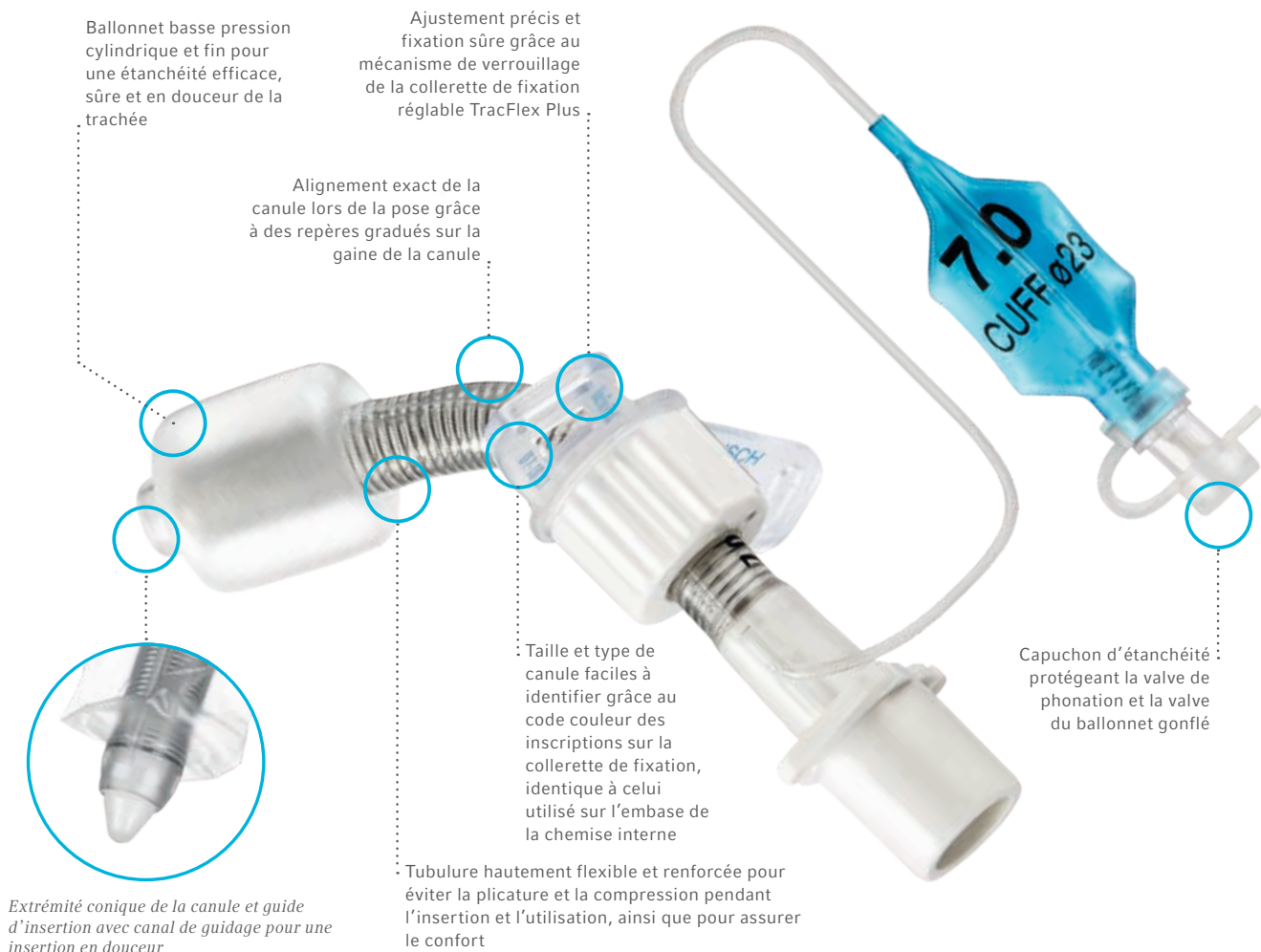

Kit TracFlex Plus (avec ballonnet, réf. 121903 ; sans ballonnet, réf. 121900)

TAILLE DE COMMANDE / D.I.	D.E. EN MM	PLAGE DE LONGUEURS (LC) EN MM	DIM. A EN MM	DIM. B EN MM	DIM. C EN MM	ANGLE θ (ENV.)	Ø DU BALL. EN MM **
7,0	10,1	60,3 - 66,5	37,5	6,2	22,8	100 °	23
8,0	11,1	66,9 - 88,5	41,5	21,6	25,4	100 °	27
9,0	12,1	70,4 - 117,3	44,5	46,4	26,4	100 °	30
10,0	13,1	78,5 - 121,3	44,5	42,8	34,0	100 °	32
11,0	14,2	80,6 - 125,3	47,5	44,7	33,1	100 °	34

** Uniquement versions avec ballonnet

Chemises internes TracFlex Plus (réf. 121910)

TAILLE DE COMMANDE	D.I. EN MM	D.E. EN MM	QTÉ
7,0	5,5	6,2	10
8,0	6,5	7,2	10
9,0	7,8	8,3	10
10,0	8,8	9,4	10
11,0	9,8	10,4	10

Notre système de chemise interne souple : Gestion efficace et simplifiée des sécrétions

La chemise interne TracFlex Plus est conçue pour éviter l'accumulation de sécrétions dans la lumière interne de la canule de trachéotomie. Elle est à usage unique pour favoriser une bonne hygiène, et réduit ainsi le risque d'infection chez les patients et les soignants.

La chemise interne TracFlex Plus, fine et flexible, s'adapte parfaitement au diamètre interne de la canule de trachéotomie. La torsion de la canule est ainsi minimisée pendant l'insertion et le retrait de la chemise interne.

Accessoires TracFlex Plus

RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
121911	Capuchon protège-douche pour canules TracFlex Plus, pour éviter l'infiltration ou l'inhalation de gouttes d'eau dans le bain ou la douche	4
121912	Capuchon antiprojections pour canules TracFlex Plus, afin de rediriger les sécrétions expulsées	4
121913	Capuchon d'étanchéité pour canules TracFlex Plus, pour le sevrage	4

Ce document est à destination du public. Les canules de trachéotomie, accessoires et chemises internes sont des produits réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant du DM : Teleflex Medical Athlone, Irlande. Demander conseil à un professionnel de santé. Le contenu de l'emballage non ouvert et non endommagé est stérile, prêt à l'emploi et à usage unique. Vérifier l'intégralité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Se reporter à la notice pour connaître les avertissements, indications, contre-indications, précautions d'emploi et instructions d'utilisation actuels.

Teleflex, le logo Teleflex, Rüsch et TracFlex Plus sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Teleflex Incorporated ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations dans ce document ne se substituent pas au mode d'emploi du produit. Mise à jour 12 22. Sous réserve de modifications techniques sans préavis. © 2023 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. MCI-101149 · RÉV. 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribué par :
Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
 Dublin Road Athlone Co Westmeath Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73 orders.intl@teleflex.com
Royaume-Uni Tél. +44 (0)14 94 53 27 61 info.uk@teleflex.com
Afrique du Sud Tél. +27 (0)11 807 4887 assist.africa@teleflex.com