

Pensato
per le vostre esigenze



TracFlex Plus


Medici - Unità di terapia intensiva, otorinolaringoiatria, sala operatoria

La politica di innovazione e miglioramento continuo che Teleflex persegue da 35 anni ha portato alla nuova gamma di cannule tracheostomiche cuffiate e non cuffiate TracFlex Plus per adulti.

Le indicazioni cliniche per l'uso delle cannule tracheostomiche sono diverse e le esigenze dei pazienti cambiano spesso; noi progettiamo i nostri prodotti per garantire loro risultati migliori. Siamo convinti che il comfort e la compliance non siano solo importanti per favorire la guarigione del paziente, ma anche per dare sostegno alle vostre équipe nel loro lavoro quotidiano, per supportare i parenti e ridurre il rischio di complicanze.

Di quali esigenze professionali abbiamo tenuto conto nel progettare TracFlex Plus?

- L'inserimento della cannula è controllato: la punta è conica e liscia e provvista di un canale per il filo guida nell'otturatore
- Le cannule flessibili/resistenti al kinking favoriscono il comfort e la compliance del paziente anche in presenza di conformazioni anatomiche insolite¹
- La flangia di fissaggio flessibile riduce il movimento della cannula contro il tessuto di granulazione durante l'uso, contribuendo a minimizzare il rischio di sanguinamento, infezione e dolore²
- Una volta sbloccata, la flangia regolabile si muove liberamente per facilitare il posizionamento; uno scatto chiaramente percepibile ne conferma la chiusura

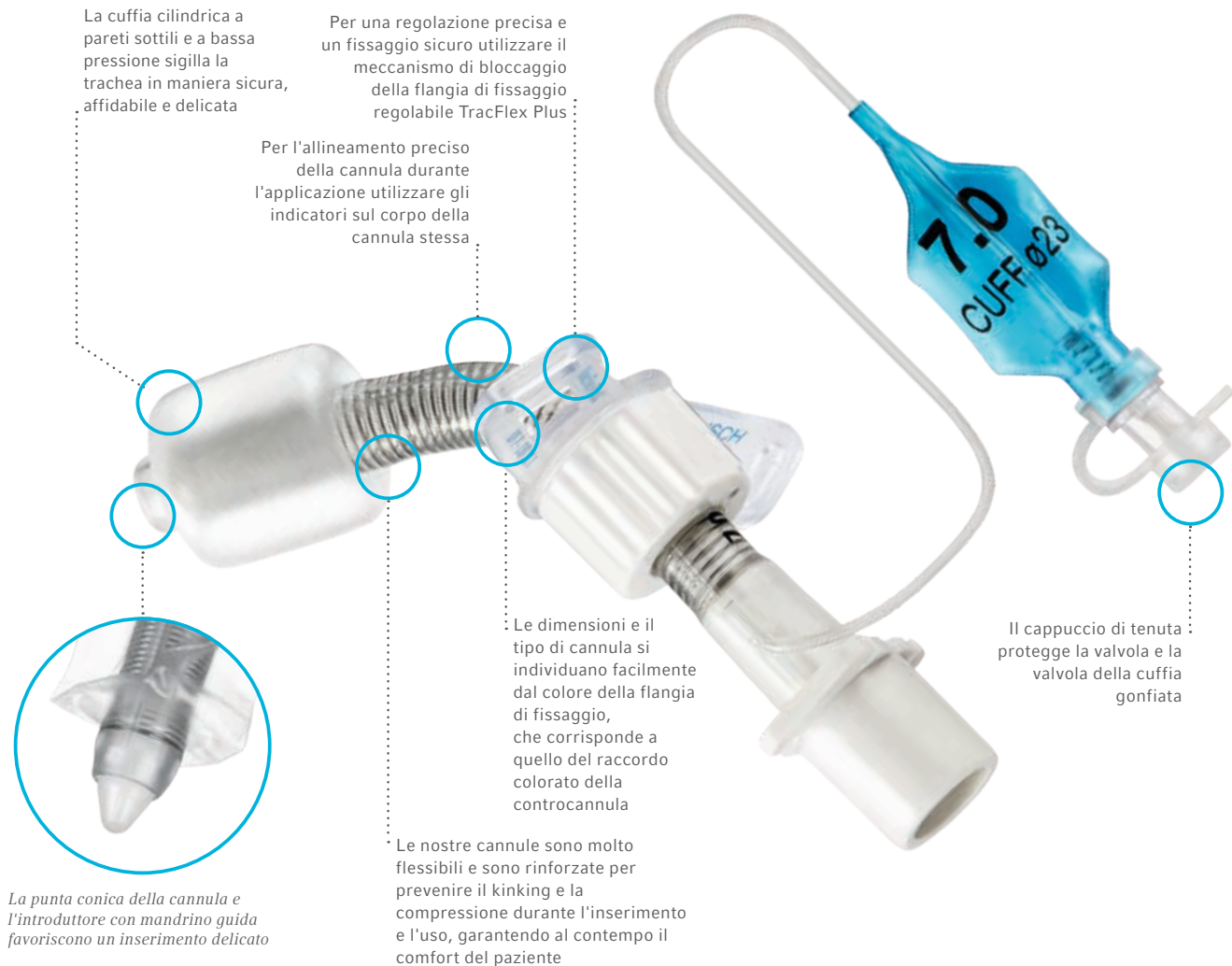

Set TracFlex Plus (con cuffia, art. 121903, senza cuffia, art. 121900)

MISURA ORDINATA/ D.I.	D.E. IN MM	INTERVALLO DI LUNGHEZZE (CL) IN MM	DIM. A IN MM	DIM. B IN MM	DIM. C IN MM	ANGOLO θ (CIRCA)	Ø CUFFIA IN MM **
● 7,0	10,1	60,3-66,5	37,5	6,2	22,8	100°	23
● 8,0	11,1	66,9-88,5	41,5	21,6	25,4	100°	27
● 9,0	12,1	70,4-117,3	44,5	46,4	26,4	100°	30
● 10,0	13,1	78,5-121,3	44,5	42,8	34,0	100°	32
● 11,0	14,2	80,6-125,3	47,5	44,7	33,1	100°	34

** Solo versioni cuffiate

La nostra controcannulla flessibile: gestione efficace e semplificata delle secrezioni

La controcannulla TracFlex Plus è progettata per proteggere il lume interno della cannula tracheostomica dall'accumulo di secrezioni. È monouso per favorire una buona igiene e ridurre il rischio di infezione per i pazienti e il personale operativo.

La controcannulla flessibile a pareti sottili TracFlex Plus aderisce perfettamente al diametro interno della cannula tracheostomica, con una minima torsione della cannula durante l'inserimento e la rimozione della controcannulla.

Accessori TracFlex Plus

ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
121911	Cappuccio protettivo per cannule TracFlex Plus con funzione di paraspruzzi per evitare l'ingresso o l'inalazione di gocce d'acqua durante il bagno o la doccia	4
121912	Dispositivo antitosse per cannule TracFlex Plus, per incanalare le secrezioni verso il basso	4
121913	Cappuccio di tenuta per cannule TracFlex Plus, per terapia rieducativa (svezzamento)	4

Per maggiori informazioni rivolgersi al rappresentante di riferimento Teleflex o visitare il microsito di Rüsch dedicato alla tracheostomia per scoprire questa linea e gli altri interessanti prodotti Rüsch.

Teleflex, il logo Teleflex, Rüsch e TracFlex Plus sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Teleflex Incorporated o delle sue affiliate negli USA e/o in altri paesi. Le informazioni riportate in questo documento non sostituiscono le Istruzioni per l'uso del prodotto. I prodotti presenti in questo catalogo possono non essere disponibili in alcuni paesi. Contattare il proprio rappresentante locale. Revisione: 12.22. Pubblicazione soggetta a modifiche tecniche senza preavviso. © 2023 Teleflex Incorporated. Tutti i diritti sono riservati. MCI-101148 · REV 0 · 05 23 PDF