

Pensato

per le vostre esigenze



TracFlex Plus

Pazienti e reti di supporto nell'assistenza domiciliare

La politica di miglioramento continuo che Teleflex persegue da 35 anni ha portato alla nuova gamma di cannule tracheostomiche cuffiate e non cuffiate TracFlex Plus per adulti.


Quando si progettano cannule tracheostomiche per soddisfare le esigenze dei pazienti in regime di assistenza alternata, queste sono le caratteristiche essenziali di cui non è possibile fare a meno:

- Comfort: cannula, cuffia (se necessaria), flangia e fascia di fissaggio
- Garanzia di una respirazione ottimale con minimo rapporto fra DE e DI delle cannule
- Accessori dedicati per migliorare la sicurezza e la vita quotidiana
- Possibilità di pulire la cannula, se necessario, per migliorare la routine igienica
- La controcannula che tiene pulita la cannula principale deve essere flessibile per non ridurre le prestazioni della cannula

Di quali esigenze abbiamo tenuto conto nel progettare TracFlex Plus?

- La cannula flessibile/resistente al kinking, la morbida fascia di fissaggio e le alette pieghevoli favoriscono il comfort durante la ventilazione/la respirazione spontanea, consentono di mangiare e bere e assecondano i movimenti naturali della testa
- Una volta sbloccata, la flangia regolabile si muove liberamente, consentendo di riposizionarla correttamente durante e dopo la gestione dello stoma
- Uno scatto percepibile all'udito conferma il blocco della flangia regolabile, per ridurre il rischio decannulazione accidentale
- Le alette di fissaggio sono trasparenti per mostrare il colore naturale della pelle
- Controcannula flessibile, dispositivo di protezione per doccia, dispositivo antitosse e cappuccio di tenuta



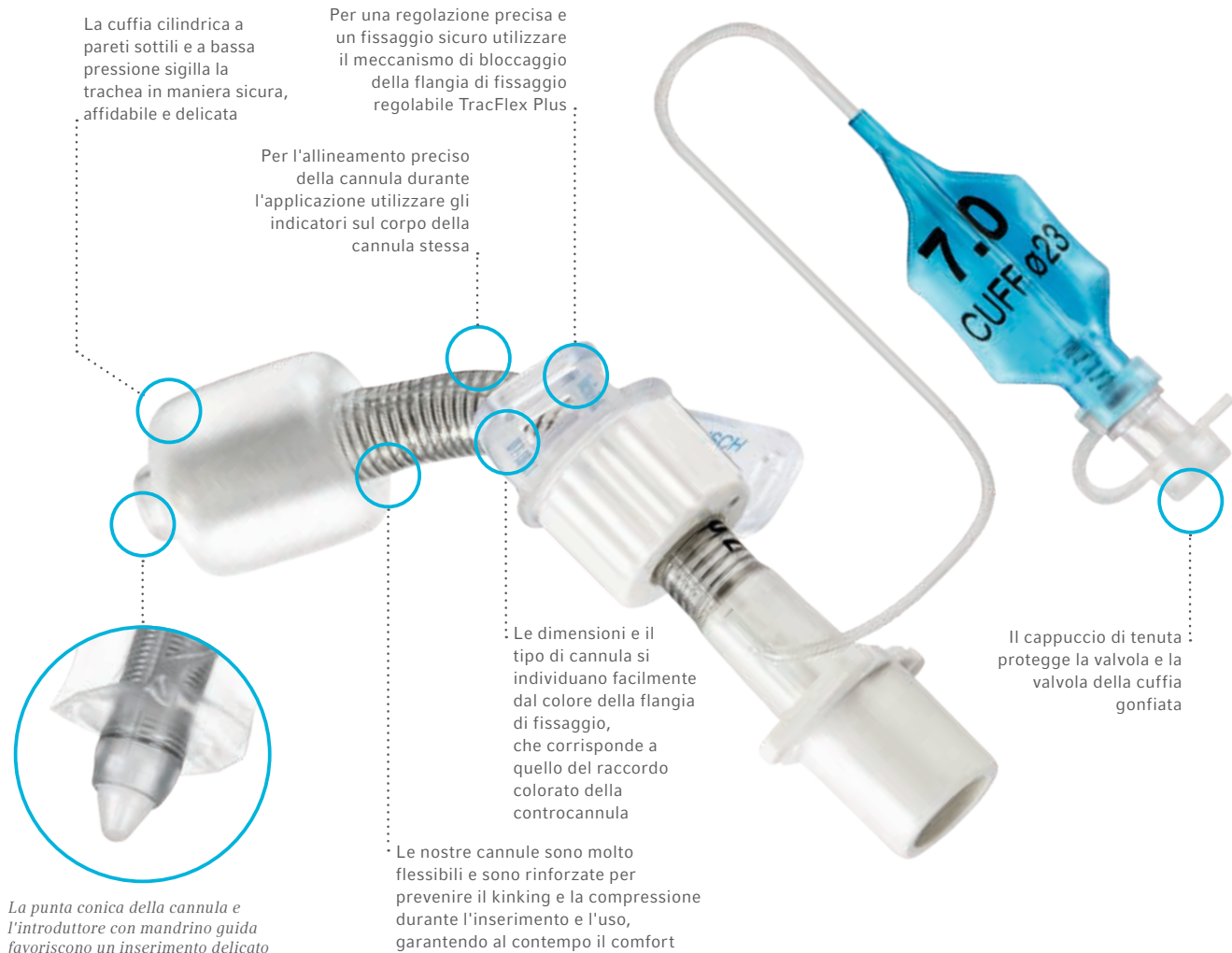

Set TracFlex Plus (con cuffia, art. 121903, senza cuffia, art. 121900)

MISURA ORDINATA/ D.I.	D.E. IN MM	INTERVALLO DI LUNGHEZZE (CL) IN MM	DIM. A IN MM	DIM. B IN MM	DIM. C IN MM	ANGOLO θ (CIRCA)	Ø CUFFIA IN MM **
● 7,0	10,1	60,3-66,5	37,5	6,2	22,8	100°	23
● 8,0	11,1	66,9-88,5	41,5	21,6	25,4	100°	27
● 9,0	12,1	70,4-117,3	44,5	46,4	26,4	100°	30
● 10,0	13,1	78,5-121,3	44,5	42,8	34,0	100°	32
● 11,0	14,2	80,6-125,3	47,5	44,7	33,1	100°	34

** Solo versioni cuffiate

Controcannule TracFlex Plus (art. 121910)

MISURA ORDINATA	D.I. IN MM	D.E. IN MM	QTÀ
● 7,0	5,5	6,2	10
● 8,0	6,5	7,2	10
● 9,0	7,8	8,3	10
● 10,0	8,8	9,4	10
● 11,0	9,8	10,4	10

La nostra controcanula flessibile: gestione efficace e semplificata delle secrezioni

La controcanula TracFlex Plus è progettata per proteggere il lume interno della cannula tracheostomica dall'accumulo di secrezioni. È monouso per favorire una buona igiene e ridurre il rischio di infezione per i pazienti e il personale operativo.

La controcanula flessibile a pareti sottili TracFlex Plus aderisce perfettamente al diametro interno della cannula tracheostomica, con una minima torsione della cannula durante l'inserimento e la rimozione della controcanula.

Accessori TracFlex Plus

ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
121911	Cappuccio protettivo per cannule TracFlex Plus con funzione di paraspruzzi per evitare l'ingresso o l'inalazione di gocce d'acqua durante il bagno o la doccia	4
121912	Dispositivo antitosse per cannule TracFlex Plus, per incanalare le secrezioni verso il basso	4
121913	Cappuccio di tenuta per cannule TracFlex Plus, per terapia rieducativa (svezzamento)	4

Per maggiori informazioni rivolgersi al rappresentante di riferimento Teleflex o visitare il microsito di Rüşch dedicato alla tracheostomia per scoprire questa linea e gli altri interessanti prodotti Rüşch.

Teleflex, il logo Teleflex, Rüşch e TracFlex Plus sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Teleflex Incorporated o delle sue affiliate negli USA e/o in altri paesi. Le informazioni riportate in questo documento non sostituiscono le Istruzioni per l'uso del prodotto. I prodotti presenti in questo catalogo possono non essere disponibili in alcuni paesi. Contattare il proprio rappresentante locale. Revisione: 12 22. Pubblicazione soggetta a modifiche tecniche senza preavviso. © 2023 Teleflex Incorporated. Tutti i diritti sono riservati. MCI-101149 · REV 0 · 05 23 PDF

Teleflex

Distribuito da:
Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
 Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Regno Unito Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Sudafrica Tel. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com