

Zaprojektowane

*z myślą o Twoich
potrzebach*



CrystalClear Plus

Klinicyści – oddziały intensywnej terapii, oddziały otorynolaryngologiczne, blok operacyjny

Jednorazowe rurki tracheostomijne Rüsch CrystalClear Plus zostały stworzone, by zapewnić atrakcyjne cenowo rozwiązanie w porównaniu z rurkami jednopacjentowymi, zwłaszcza jako opcja pierwszej rurki, gdyż zwykle i tak konieczna jest jej wymiana przed upływem 30 dni¹.

Rurka tracheostomijna Rüsch CrystalClear Plus wykonana z termoczułego PVC ma wystarczającą sztywność ułatwiającą wprowadzanie, a następnie mięknie pod wpływem temperatury ciała, aby dopasować się do budowy anatomicznej¹. Wewnętrzna kaniula do rurek tracheostomijnych CrystalClear Plus jest jałowa, bez lateksu, zbudowana z elastycznej siatki poliestrowej (PET) niezawierającej DEHP ze zintegrowanym silikonowym ogranicznikiem oznaczonym kodem kolorowym w zależności od rozmiaru. Elastyczność rurki nie wpływa negatywnie na jej efektywność.

W jaki sposób potrzeby tej grupy zawodowej zostały uwzględnione w procesie projektowania produktów CrystalClear Plus?

- Elastyczny kołnierz i miękka opaska szyjna pomagają zmniejszać ruch rurki względem ziarninującej tkanki podczas używania, co może zmniejszyć ryzyko związane z krwawieniem, zakażeniem i bólem².
- Cienkościenne rurki tracheostomijne z mankietem i bez mankietu są dostępne w rozmiarach od 3,5 mm do 10,0 mm, wraz ze wszystkimi rozmiarami połówkowymi, aby zwiększać komfort i optymalizować wysiłek oddechowy pacjenta.
- 2 oznaczone kolorem kaniule wewnętrzne są elementami zestawów w rozmiarze 6 i większych.
- Zintegrowany łącznik obrotowy 15 mm pozwala na zmniejszenie skręcania rurki przez układ oddechowy podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych.

Rüsch CrystalClear Plus

Rurka tracheostomijna

Łącznik obrotowy 15mm
Przeznaczone do zredukowania siły skrętnej od układów oddechowych

Mankiet
Rurki są dostępne w wersji z mankiem i bez mankieta


Kaniula wewnętrzna

Kolor gniazda kaniuli wewnętrznej odpowiada kolorowi czcionki na kołnierzu mocującym

Cienki, elastyczny kołnierz
Ułatwia skuteczną pielęgnację stomii¹

Trzon 95°

Zapewnia poprawne ułożenie rurki zapobiegające przypadkowej dekanilacji²

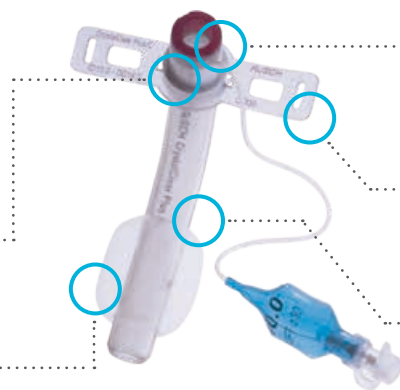

Rurki tracheostomijne CrystalClear Plus firmy Rüsch

NUMER KATALOGOWY*	NUMER KATALOGOWY**	ROZMIAR / ŚR. WEWN. (MM)	ŚR. ZEWN. (MM)	DŁUGOŚĆ (MM)	KĄT Ø OK.	MANKIET Ø (MM)	KANIULA WEWNĘTRZNA	RURKA	KOLOR	SZT.
121300-000035	121303-000035	3,5	5,3	47,0	95°	11,0	–	3,5	Czerwony	5
121300-000040	121303-000040	4,0	5,9	54,0	95°	12,0	–	4,0	Biały	5
121300-000045	121303-000045	4,5	6,5	54,0	95°	14,0	–	4,5	Szary	5
121300-000050	121303-000050	5,0	7,0	57,0	95°	14,0	–	5,0	Niebieski	5
121300-000055	121303-000055	5,5	7,5	58,0	95°	15,0	–	5,5	Zielony	5
121300-000060	121303-000060	6,0	8,7	64,0	95°	19,0	6,0	–	Pomarańczowy	5
121300-000065	121303-000065	6,5	8,7	64,0	95°	19,0	6,5	–	Bordowy	5
121300-000070	121303-000070	7,0	10,0	70,0	95°	21,0	7,0	–	Niebieski	5
121300-000075	121303-000075	7,5	10,7	75,5	95°	25,0	7,5	–	Żółty	5
121300-000080	121303-000080	8,0	11,3	81,0	95°	28,0	8,0	–	Fioletowy	5
121300-000085	121303-000085	8,5	11,3	81,0	95°	28,0	8,5	–	Zielony	5
121300-000090	121303-000090	9,0	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	–	Brązowy	5
121300-000095	121303-000095	9,5	12,7	87,0	95°	28,0	9,0	–	Granatowy	5
121300-000100	121303-000100	10,0	14,0	95,5	95°	30,0	10,0	–	Czerwony	5

* Bez mankieta. ** Z mankiem.

Zestaw zawiera następujące elementy: Rurka tracheostomijna (z mankiem lub bez mankieta, miękka opaska szyjna, 2 oznaczone kolorem kaniule wewnętrzne, karta pacjenta, saszetka żelu lubrykującego na bazie wody)

Rüsch CrystalClear – akcesoria

NUMER KATALOGOWY	OPIS	SZT.
121311	Nakładka prysznicowa do rurki Rüsch CrystalClear Plus	4
121312	Nakładka kaszlowa do rurki Rüsch CrystalClear Plus	4
121313	Nakładka uszczelniająca do rurki Rüsch CrystalClear Plus	4

Zestaw Rüsch Crystal Clear PercuTwist PDT

NR KAT.	ROZMIAR ZAMÓWIENIA / ŚR. WEWN.	SZT.
121556	7,0 / 8,0 / 9,0	1

Zestaw zawiera następujące elementy: Rurka z mandrynem, kaniula nakłuwająca, strzykawka, przewodnik, kaniula wewnętrzna, opaska szyjna

Kaniula wewnętrzna Rüsch CrystalClear

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	ŚR. WEWN. (MM)	ŚR. ZEWN. (MM)	KOLOR	SZT.
121310-000060	6,0	5,0	5,7	Pomarańczowy	10
121310-000065	6,5	5,0	5,7	Bordowy	10
121310-000070	7,0	6,0	6,7	Niebieski	10
121310-000075	7,5	6,5	7,3	Żółty	10
121310-000080	8,0	7,0	7,7	Fioletowy	10
121310-000085	8,5	7,0	7,7	Zielony	10
121310-000090	9,0	8,0	8,7	Brązowy	10
121310-000095	9,5	8,0	8,7	Granatowy	10
121310-000100	10,0	8,8	9,7	Czerwony	10

www.teleflextracheostomy.com



Piśmiennictwo

- Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. NCEPOD: On the right Trach? 2014. Available at: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Accessed August 22, 2017.
- Mallett J, Albarran JW, Richardson A, eds. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Oxford, UK: Wiley Blackwell; 2013.

W razie potrzeby więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy Teleflex. Można też odwiedzić naszą mikrostronę internetową Rusch Tracheostomy, gdzie znajduje się więcej informacji na temat tej gamy produktów i innych ciekawych produktów Rüsch. Zawartość nieotwartego, nieuszkodzonego opakowania jest czysta, gotowa do użytku i przeznaczona do jednorazowego użycia. Należy się zapoznać z ulotką dołączoną do opakowania, w której można znaleźć aktualne ostrzeżenia, wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności oraz instrukcję użytkowania.

Teleflex, logo Teleflex, CrystalClear i Rüsch są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Teleflex Incorporated lub jej spółek stowarzyszonych w USA i/lub innych krajach. Informacje zawarte w tym dokumencie nie zastępują instrukcji obsługi produktu. Niektóre z produktów z tego katalogu mogą być niedostępne we wszystkich krajach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia. Aktualizacja 02 2023

© 2023 Teleflex Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone. MCI-2023-0074 · WER. 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Dystrybutor:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Faks +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Wielka Brytania Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Polska Tel. +48 22 462 40 32 · orders.pl@teleflex.com