

Zaprojektowane

*z myślą o Twoich
potrzebach*



TracFlex Plus


Personel pielęgniarski i osoby tworzące sieć wsparcia w zakresie opieki oddechowej na oddziałach intensywnej terapii

Firma Teleflex od ponad 35 lat nie ustaje w tworzeniu innowacji i doskonaleniu swoich produktów, a teraz oferuje nową, udoskonaloną gamę zestawów rurek tracheostomijnych z mankietem i bez mankietów dla pacjentów dorosłych.

Personel pielęgniarski i osoby tworzące sieć wsparcia w zakresie opieki oddechowej w największym stopniu wchodzi w interakcję z pacjentami po tracheostomii i ich rodzinami, przez co naszym priorytetem jest zapewnić wsparcie w zakresie wyzwań, z jakimi mierzy się ta grupa, zaczynając od użyteczności produktu, a także z perspektywy codziennej praktyki pielęgnacyjnej / terapii.

W jaki sposób potrzeby tej grupy zawodowej zostały uwzględnione w procesie projektowania produktu TracFlex Plus?

- Bardzo elastyczne / niezałamujące się rurki i miękka opaska szyjna zostały stworzone, aby zwiększać komfort pacjenta i akceptację rurki.
- Giętki kołnierz szyjny zmniejsza ruch rurki względem ziarninującej tkanki podczas używania, co zmniejsza ryzyko krwawienia, zakażenia i bólu.
- Regulowany kołnierz porusza się swobodnie, gdy jest odblokowany, pozwalając na dostęp do stomii.
- Odgłos kliknięcia potwierdza, że regulowany kołnierz jest stabilnie zamocowany, aby zredukować ryzyko przypadkowej dekanilacji.

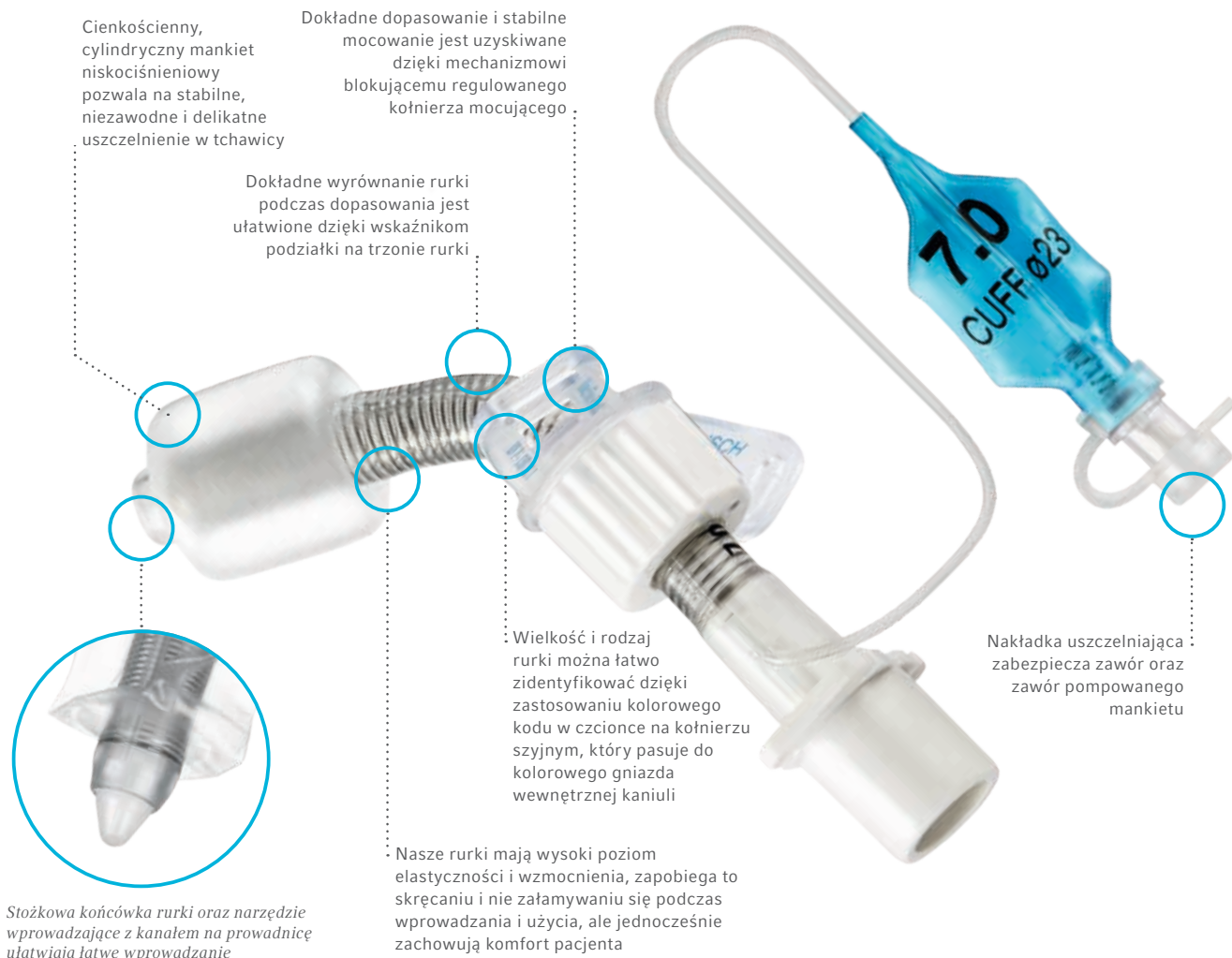

Zestaw TracFlex Plus (z mankietem, nr kat. 121903; bez mankietu, nr kat. 121900)

ROZMIAR ZAMÓWIENIA / ŚR. WEWN.	ŚR. ZEWN. W MM	ZAKRES DŁUGOŚCI (CL) W MM	WYM. A W MM	WYM. B W MM	WYM. C W MM	KĄT Ø (OK.)	Ø MAN-KIETU W MM**
7,0	10,1	60,3–66,5	37,5	6,2	22,8	100°	23
8,0	11,1	66,9–88,5	41,5	21,6	25,4	100°	27
9,0	12,1	70,4–117,3	44,5	46,4	26,4	100°	30
10,0	13,1	78,5–121,3	44,5	42,8	34,0	100°	32
11,0	14,2	80,6–125,3	47,5	44,7	33,1	100°	34

** Tylko wersje z mankietem.

Kaniule wewnętrzne TracFlex Plus (ref. 121910)

ROZMIAR ZAMÓWIENIA	ŚR. WEWN. W MM	ŚR. ZEWN. W MM	SZT.
7,0	5,5	6,2	10
8,0	6,5	7,2	10
9,0	7,8	8,3	10
10,0	8,8	9,4	10
11,0	9,8	10,4	10

Nasz system elastycznej kaniuli wewnętrznej: Skuteczne usuwanie wydzieliny stało się prostsze

Kaniula wewnętrzna TracFlex Plus jest zaprojektowana tak, aby chronić wewnętrzny kanał rurki tracheostomijnej przed nagromadzeniem się wydzieliny. Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku, aby ułatwić utrzymanie odpowiedniej higieny, co redukuje ryzyko zakażenia u pacjentów i opiekunów.

Cienkościenna, giętka kaniula wewnętrzna rurki TracFlex Plus pozwala na ścisłe dopasowanie do wewnętrznej średnicy rurki tracheostomijnej z minimalnym skręceniem rurki podczas wprowadzania i wyjmowania kaniuli wewnętrznej.

Akcesoria TracFlex Plus

REF.	OPIS	SZT.
121911	Zatyczka prysznicowa do rurek TracFlex Plus zabezpiecza przed pryskającą wodą, zapobiegając przedostawaniu się lub wdychaniu kropli wody podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem	4
121912	Zatyczka kaszlowa do rurek TracFlex Plus pomaga w odprowadzaniu wydzieliny w kierunku do dołu	4
121913	Zatyczka uszczelniająca do rurek TracFlex Plus (podczas odłączania)	4

W razie potrzeby więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy Teleflex. Można też odwiedzić naszą mikrostronę internetową Rusch Tracheostomy, gdzie znajduje się więcej informacji na temat tej gamy produktów i innych ciekawych produktów Rusch.

Teleflex, logo Teleflex, Rusch oraz TracFlex Plus są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Teleflex Incorporated lub jej spółek stowarzyszonych w USA lub w innych krajach. Informacje zawarte w tym dokumencie nie zastępują instrukcji obsługi produktu. Niektóre z produktów z tego katalogu mogą być niedostępne we wszystkich krajach. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem. Aktualizacja 12 22. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia. © 2023 Teleflex Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone. MCI-101091 · WER. 0 · 06 23 PDF

Teleflex

Dystrybutor:

Teleflex Headquarters International, Ireland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Faks +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Wielka Brytania Tel. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Polska Tel. +48 22 462 40 32 · orders.pl@teleflex.com